




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СТОЛ-ТУМБА

СтTr-K1200

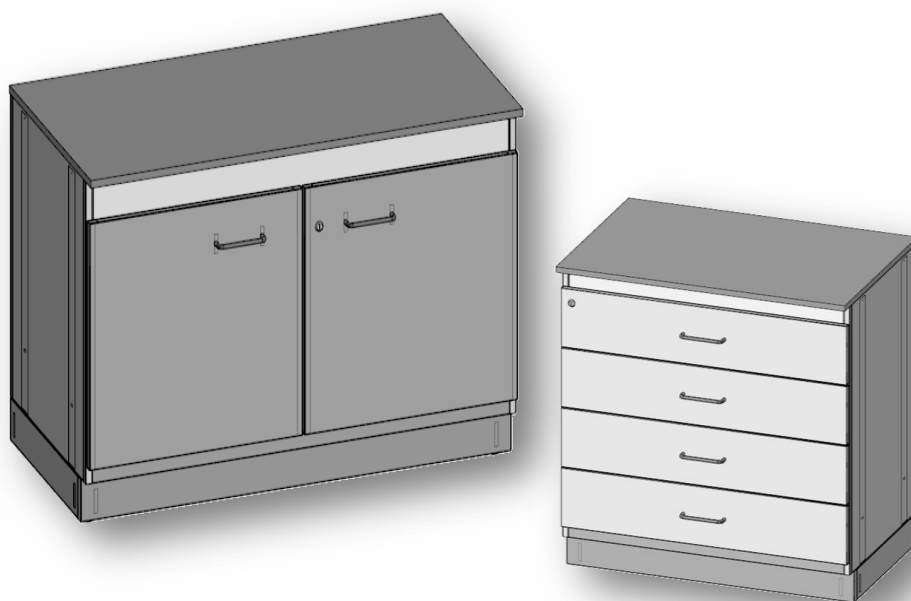

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Инструкция по сборке
6. Инструкция по обслуживанию
7. Правила эксплуатации
8. Свидетельство о приемке
9. Консервация, транспортирование и хранение
10. Гарантия изготовителя
11. Сведения о рекламациях

СТОЛ-ТУМБА

1. Назначение и область применения

1.1. Стол-тумба (далее по тексту - «Стол») предназначен для эксплуатации в химико-аналитических, исследовательских и производственных лабораториях с вредными и агрессивными веществами кроме фтористоводородной кислоты, щелочи и др. Стол разработан и изготовлен с применением современных технологий и материалов.

1.2. Стол изготавливается в исполнении УХЛ-4 для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре +10...+40°C и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги.

2. Технические данные

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Габаритные размеры, мм:	Длина	1200
	Глубина	750
	Высота расположения рабочей плиты	900
Допускаемая нагрузка на рабочую плиту, кН		0,5
Номинальная рабочая нагрузка на верхние ящики, кг		10
Номинальная рабочая нагрузка на нижний ящик, кг		15
Электроснабжение (при наличии электроблока)		220В/50Гц
Номинальная суммарная мощность на каждый электроблок, кВт		3,2
Масса, не более, кг		

2.2. Описание

Стол представляет собой сборную конструкцию деталей из металлического листа, с полимерным порошковым покрытием. В зависимости от заказа может быть с дверцами или с выдвижными ящиками, а так же в комбинированном варианте. Стол комплектуется полками. Согласно заказу рабочая плита (столешница) изготавливается из нержавеющей стали/ Монолитной керамики/ Дюркона/ Пластика/Плитки керамической. В целях обеспечения сохранности содержимого стола-тумбы, двери или ящики закрываются замком.










Производитель может вносить изменения, улучшающую конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.





2.3. Комплектация







В дополнительную комплектацию стол-тумбы входит:

- Комплект футеровки из полипропилена;
- Электроблок.

3. Комплект поставки

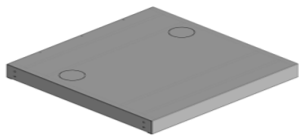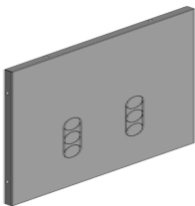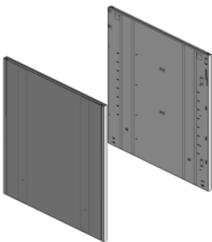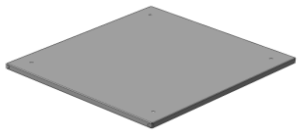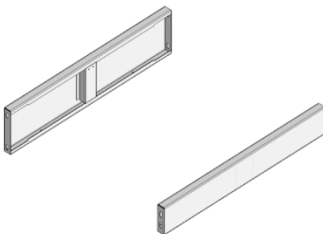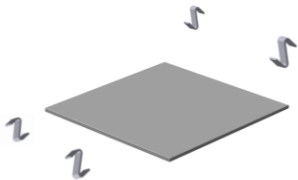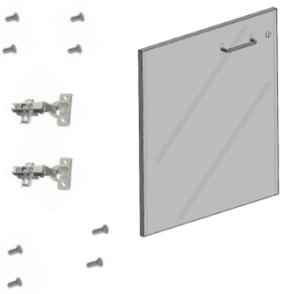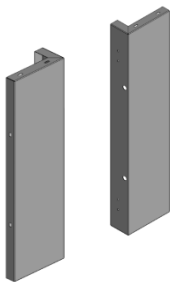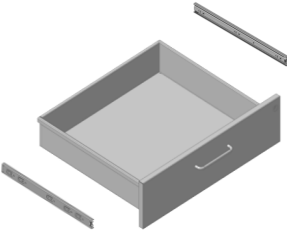№	1	2	3
Наименование	Основание (днище)	Стенка задняя	Стенки боковые с боковыми вставками (левая и правая)
			
Количество	1	1	2
№	4	5	6
Наименование	Рабочая плита (столешница)	Комплект перемычек – передняя (узкая), задняя (широкая)	Комплект полок (полка, четыре полкодержателя)*
			
Количество	1	1	n
№	7	8	9
Наименование	Комплект дверок с петлями дверными*	Вставка боковая для дверок (для стола 1500 мм)*	Комплект ящиков (ящик с направляющими)*
			
Количество	n	2	n
n – количество согласно заказу			
* - опция согласно заказу			

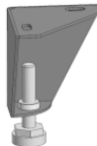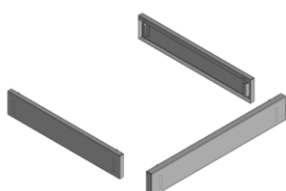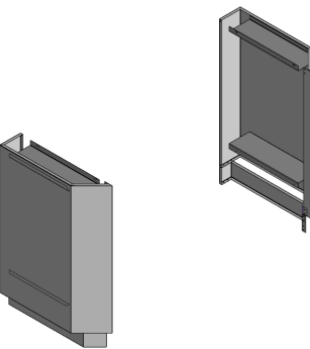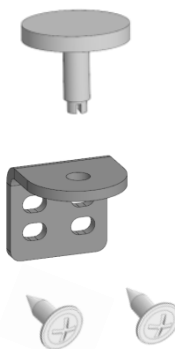№	10	11	13
Наименование	Комплект замка для ящиков (замок, рейка, ограничители)*	Ножка с опорой	Комплект плинтусов с магнитами
			
Количество	п	п	п
№	14	15	16
Наименование	Комплект болтов	Комплект винтов самонарезающих	Комплект шайб
			
Количество	1	1	1
№	17	18	19
Наименование	Панель боковая (для трапецевидной тумбы)*	Комплект крепления для столешницы из пластика	Комплект крепления для столешницы из монолитной керамики/дюркона (кронштейн, тарельчатая опора)
			
Количество	2	п	п

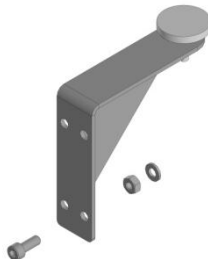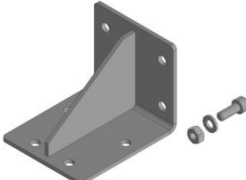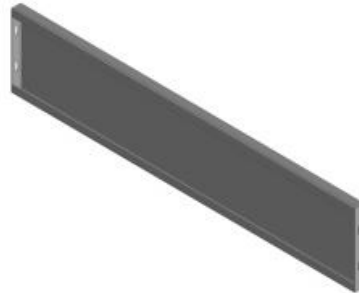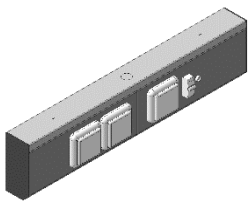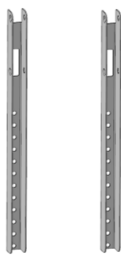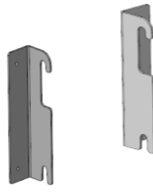	20	21	22
№	Комплект крепления для столешницы (кронштейн, тарельчатая опора)*	Кронштейн с креплением дополнительных ножек*	Комплект вставок*
Наименование			
Количество	п	п	п
	23	24	
	Панель*	Перемычка*	
Наименование			
Количество	п	п	
п – количество согласно заказу			
* - опция согласно заказу			
№	25	26	27
	Электроблок*	Стойка электроблока*	Комплект съемных кронштейнов*
Наименование			
Количество	п	2	1
п – количество согласно заказу			
* - опция согласно заказу			


4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать комплектующие изделия, проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.


5. Инструкция по сборке изделия

Необходимый для сборки инструмент: шуруповёрт (насадка крестовая и шестигранная), отвертка шлицевая.


5.1. Собрать каркас, используя болты и шайбы. Передняя и задняя перемычки крепятся аналогично.

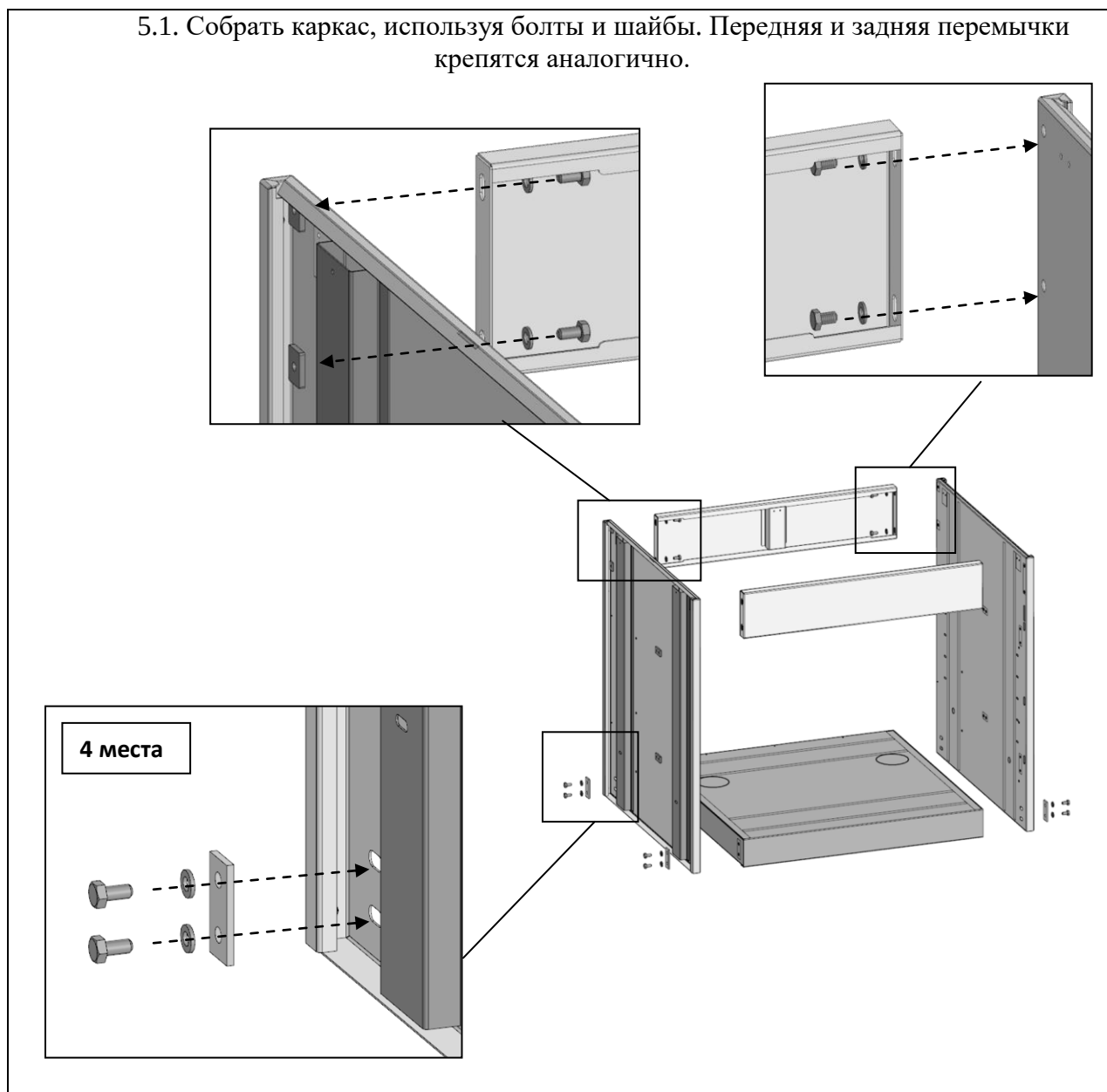


5.2. К собранному каркасу присоединить ножки с опорами, а также винт заземления с гайками и шайбами.

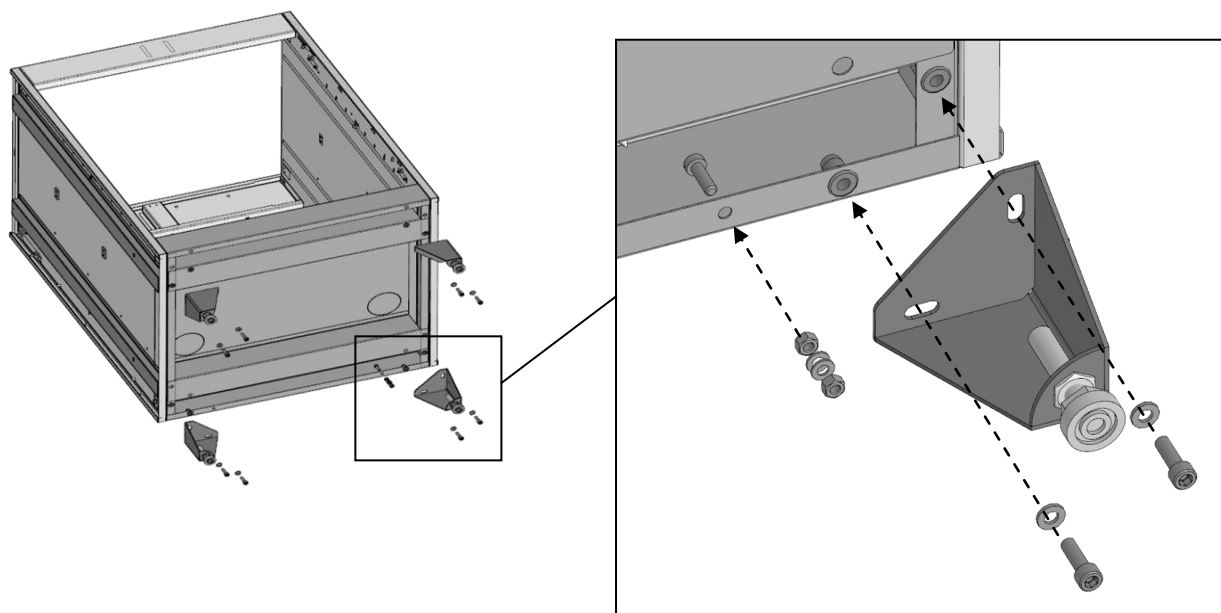


5.3. Установить заднюю стенку. Закрепить саморезами к боковым стенкам, днищу, задней перемычке. (Для стола длиной 1500 мм с дверками – заднюю стенку установить после установки внутренней полки)

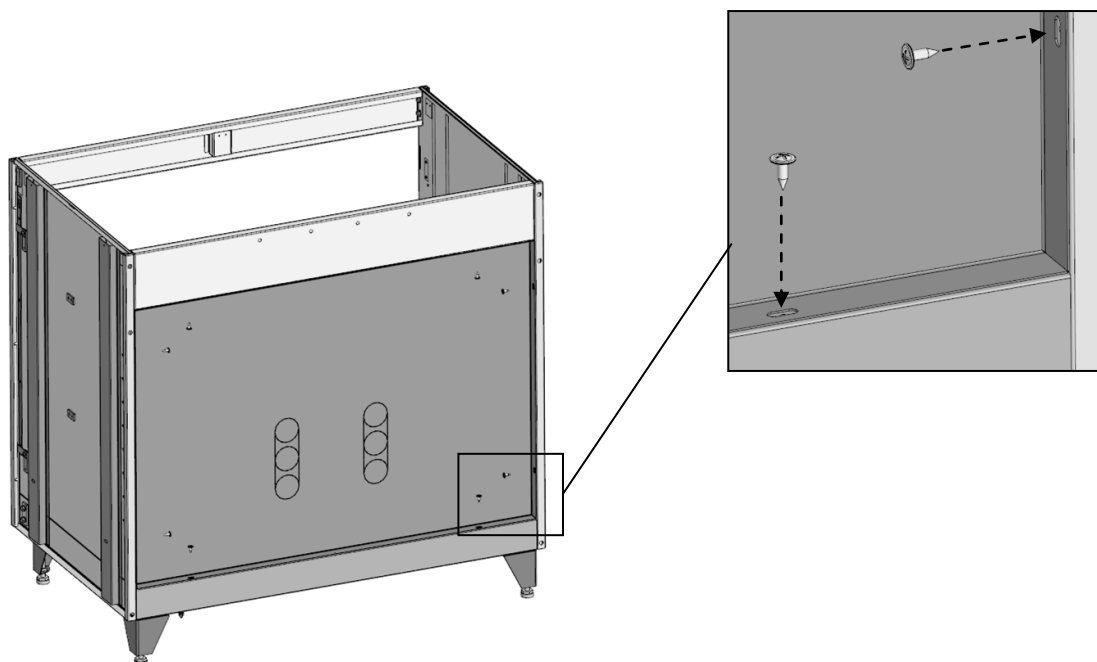

5.4. При комплектации ящиками: Установить рейку для замка. К передней части боковой стенке вложить рейку (шипы в соответствующие пазы), далее прижать ограничителями и прикрутить их.

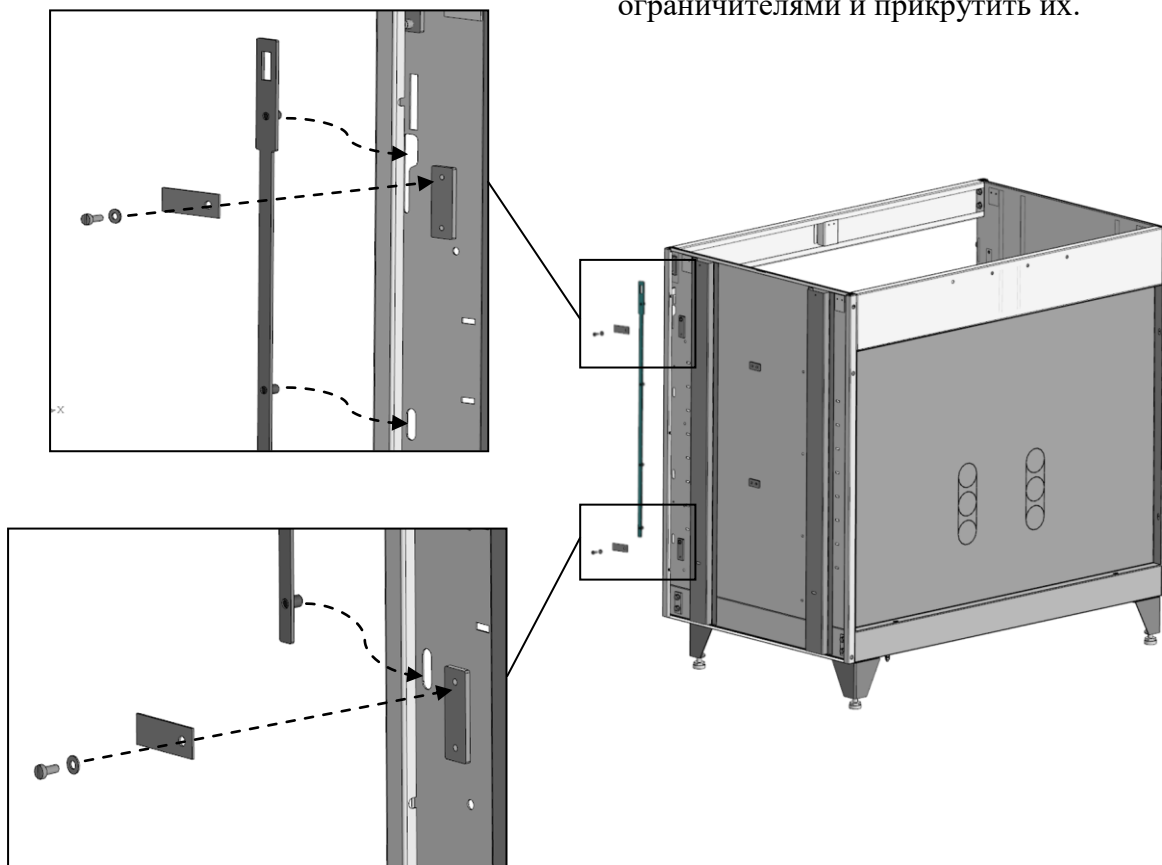


5.4.1. Собрать ящики. Соответствующую часть направляющих прикрутить к ящику, ответные части к внутренней стороне боковых стенок стола-тумбы.

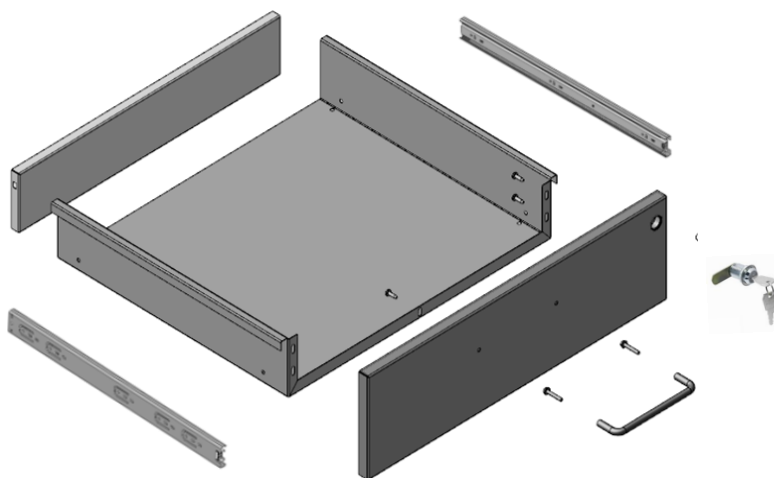



5.4.2. Установить ящики. После установки ящиков проверить работу комплекта замка. Установленная внутри рейка должна двигаться и запирать все ящики. Дальнейшая сборка см. п 5.6 и т.д.




5.5. **При комплектации дверкой:** Подготовить дверь (-и) к монтажу. К двери прикрутить петли дверные, замок, ручку.

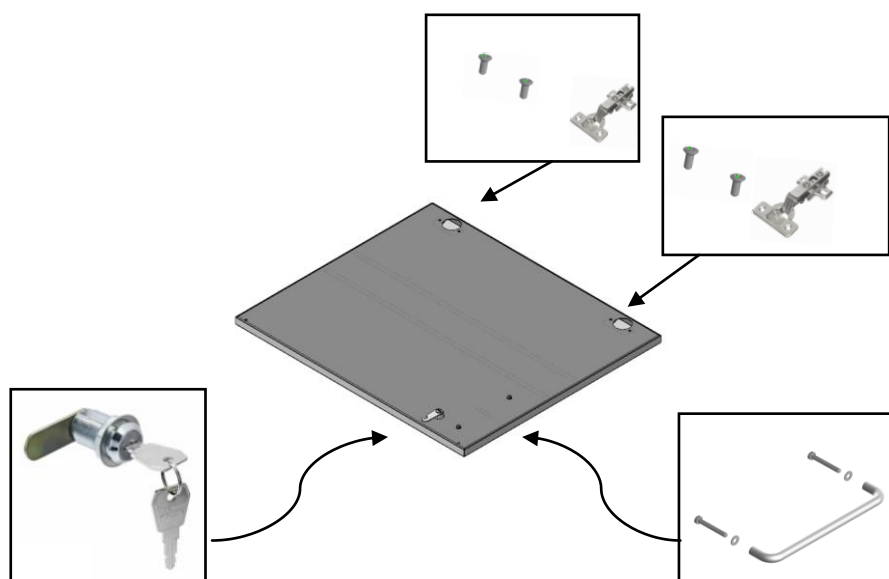


5.5.1. **Для стола длиной 1500 мм с дверками.** Боковые вставки для дверок установить и прикрутить с внутренней стороны винтами.

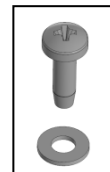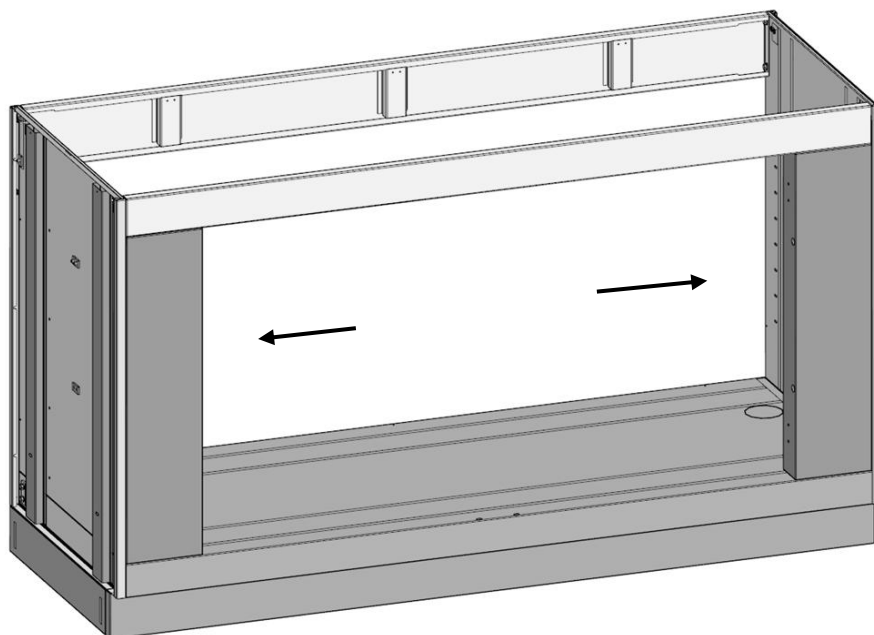


5.5.2. **Для стола длиной 1500 мм с дверками.** Монтировать двери на стол-тумбу, дальнейшая сборка см. п.5.6 и т.д.

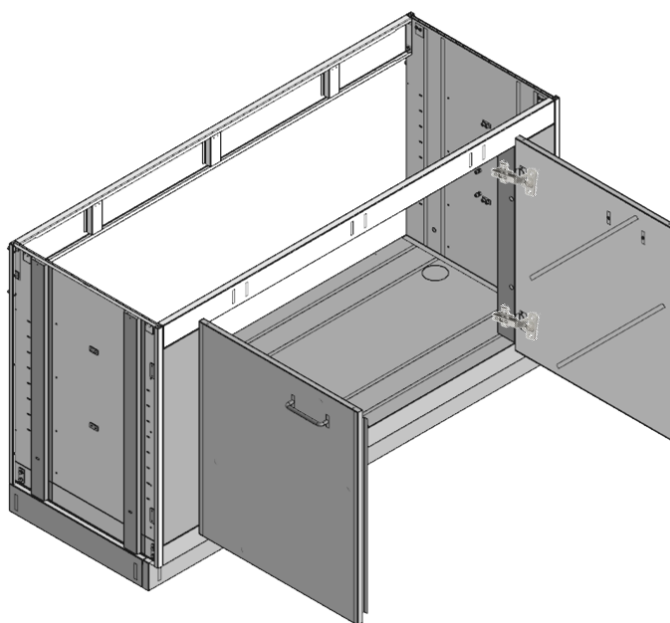


5.5.3. Монтировать дверь на стол-тумбу. Дверь стола закрыть. Проверить работу замка и отсутствие отклонений общей геометрии стола. Окончательно затянуть все винтовые и болтовые соединения.

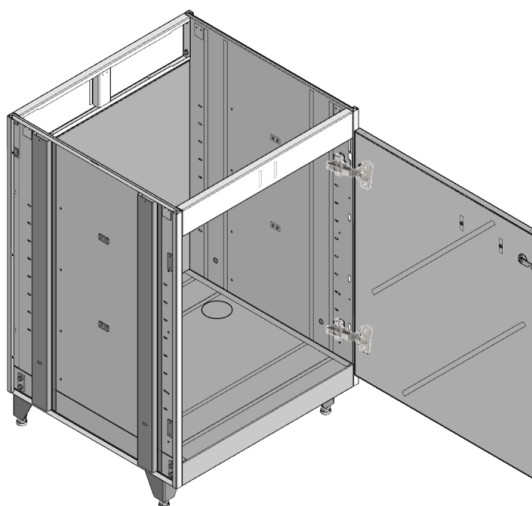


5.6. Установить боковые вставки или панели боковые (для трапецевидной тумбы) согласно заказу. При монтаже зацеп боковой вставки должен установиться в паз стенки боковой.

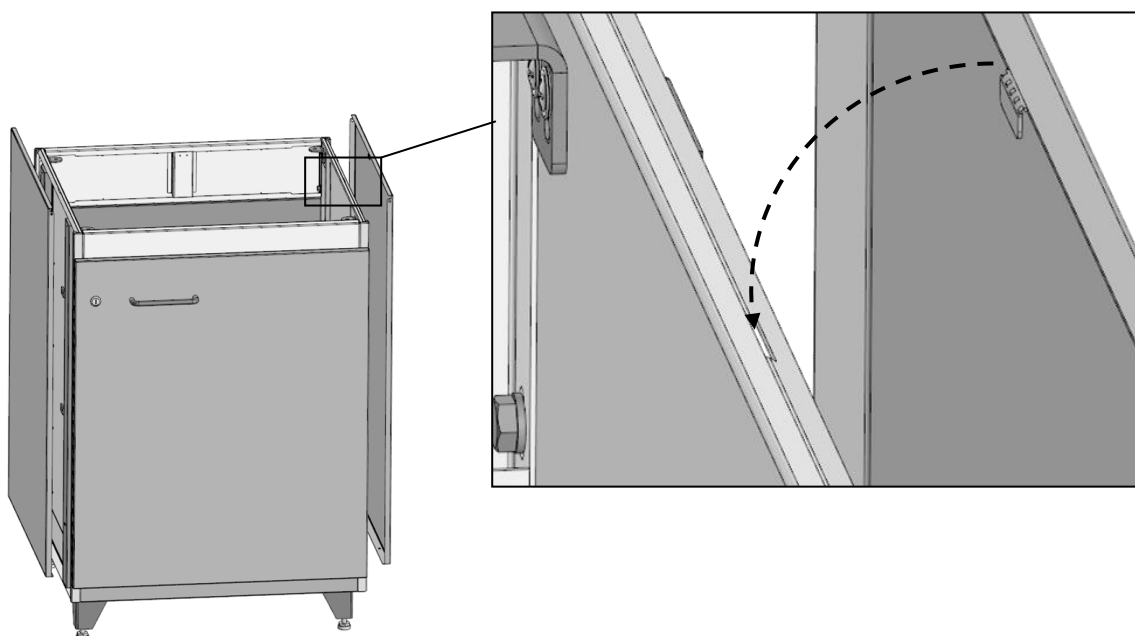


5.6.1. Для трапецевидной тумбы: Крепление левой боковой панели идентично креплению правой боковой панели.

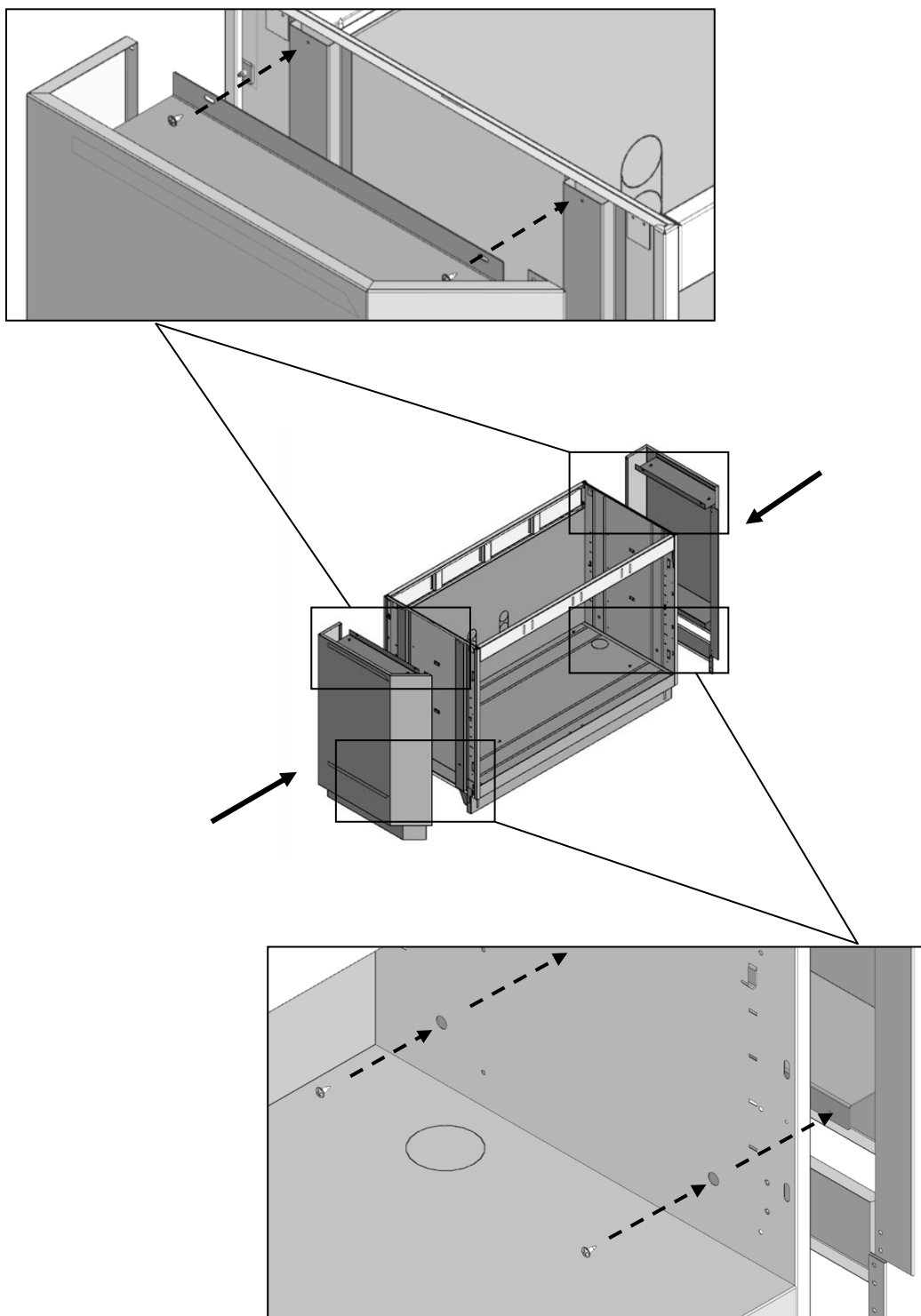


5.7. Для стола шириной 750 мм при установке задней технической панели по заказу установить дополнительные кронштейны к задней перемычке с опорами для столешницы. Закрепить винтами M6x16 DIN912, шайбой 6 DIN125 и гайкой M6 DIN934.

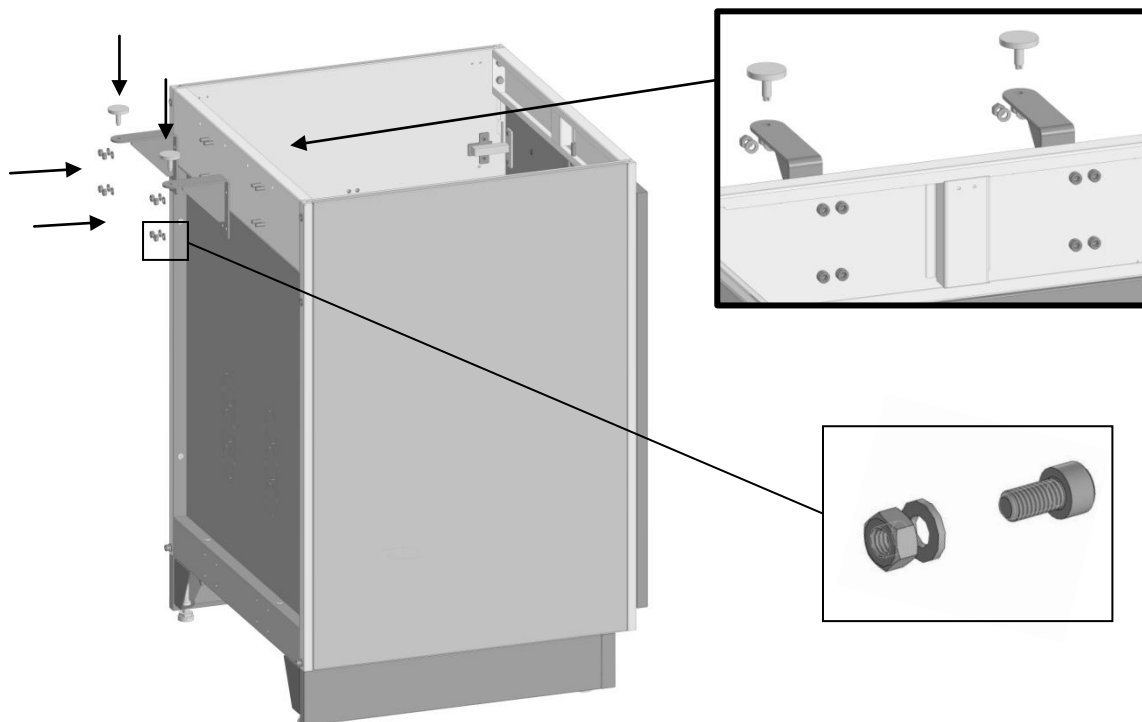


5.7.1. Для стола шириной 750 мм при установке задней технической панели по заказу установить дополнительные кронштейны к основанию с ножками и опорами для стола. Закрепить винтами M6x16 DIN912, шайбой 6 DIN125 и гайкой M6 DIN934.

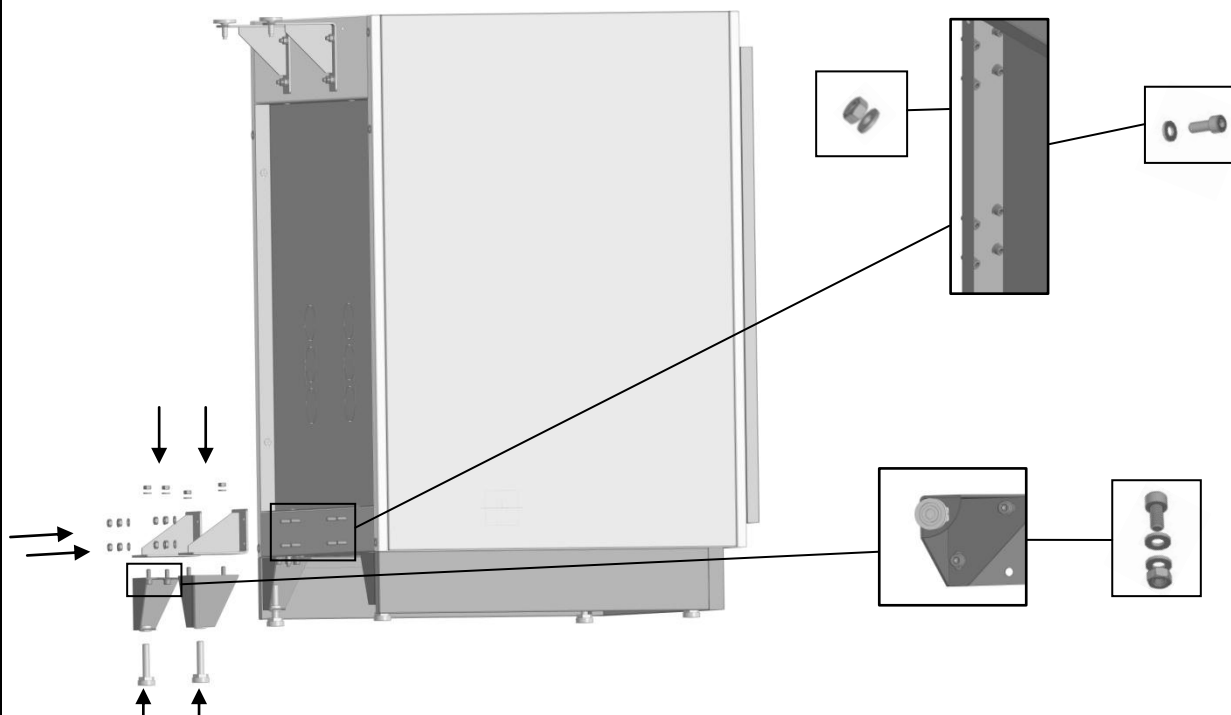


5.7.2. Для стола глубина 750 мм при установке задней технической панели по заказу закрепить заднюю боковую панель к боковым стенкам винтами М6 DIN912 с шайбой 6 DIN125.

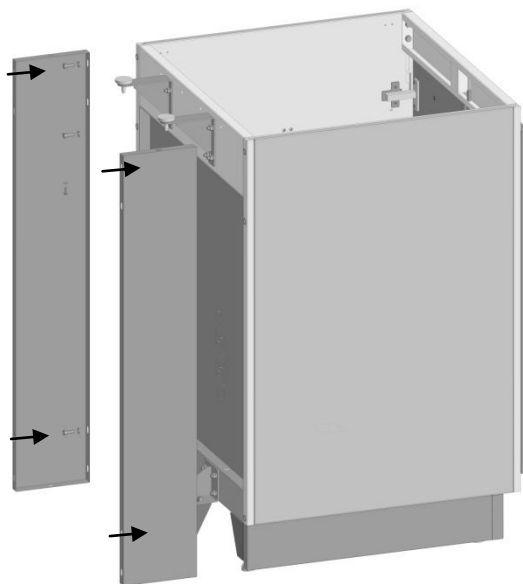


5.7.3. Для стола глубиной 750 мм при установке задней технической панели по заказу с дополнительной перемычкой соединить боковые вставки между собой винтами М4х12 DIN7500 и шайбой 4 DIN125 и потом вставки закрепить к боковым стенкам винтами М6х16 DIN912 и шайбой 6 DIN125

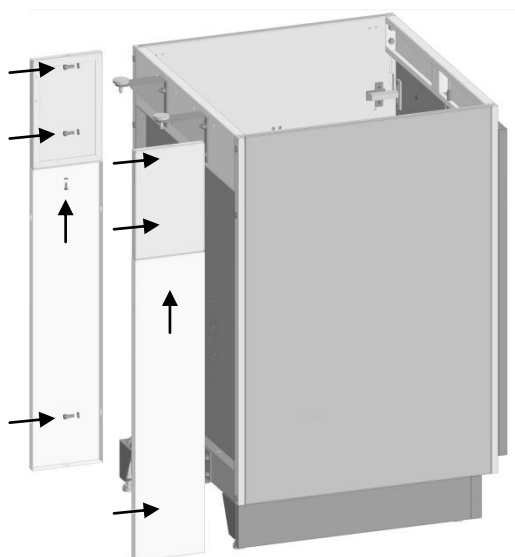

5.7.4. Для стола глубиной 750 мм при установке задней технической панели по заказу с дополнительной перемычкой установить дополнительную перемычку винтами M4x12 DIN7500 и шайбой 4 DIN125

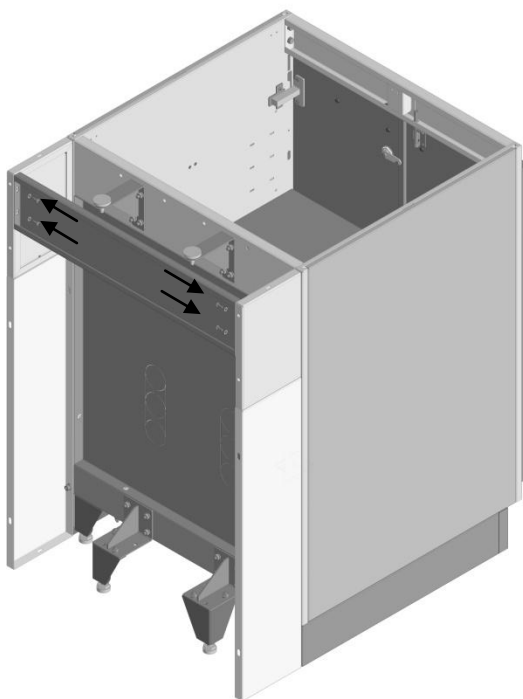

5.8. При комплектации столешницей из пластика (плитка керамогранитная/сталь нержавеющая). Установить кронштейны для крепления столешницы. При монтаже использовать нижние отверстия кронштейна.

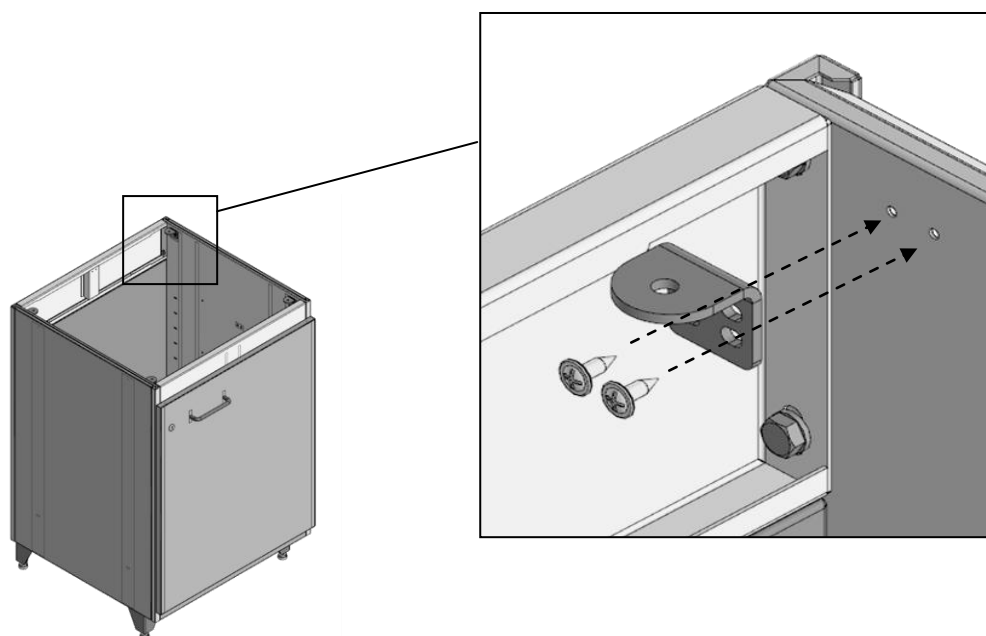



5.8.1 Установить столешницу на каркас стола и разметить точки крепления. Произвести засверловку отверстий на глубину не менее 3мм до лицевой поверхности столешницы.



5.8.2 Установить столешницу на каркас и вкрутить саморезы по намеченным отверстиям.




5.9. **При комплектации столешницей из монолитной керамики или дюркона.** Установить кронштейны и тарельчатые опоры для крепления столешницы. При монтаже использовать **верхние** отверстия кронштейна.

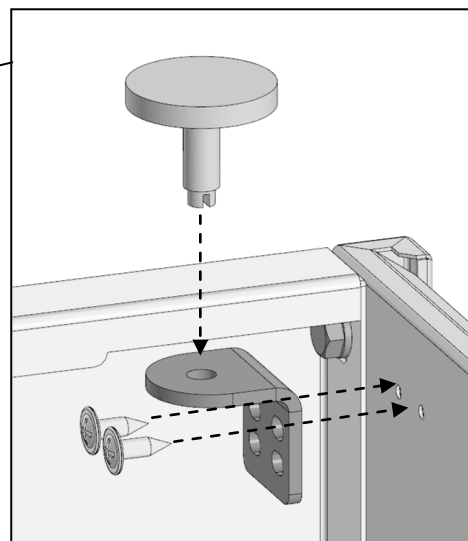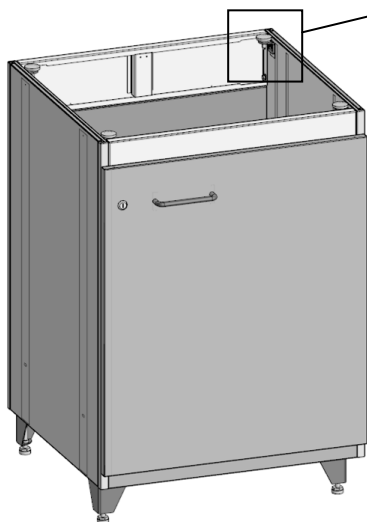


5.9.1. Установить столешницу на каркас, предварительно нанести клей на тарельчатые опоры. Приклеить столешницу на тарельчатые опоры.


5.9. При комплектации с полками: Установить полкодержатели (навесы). Установить комплект полок. Каждую полку зацепить за четыре полкодержателя, установленных на одном уровне.

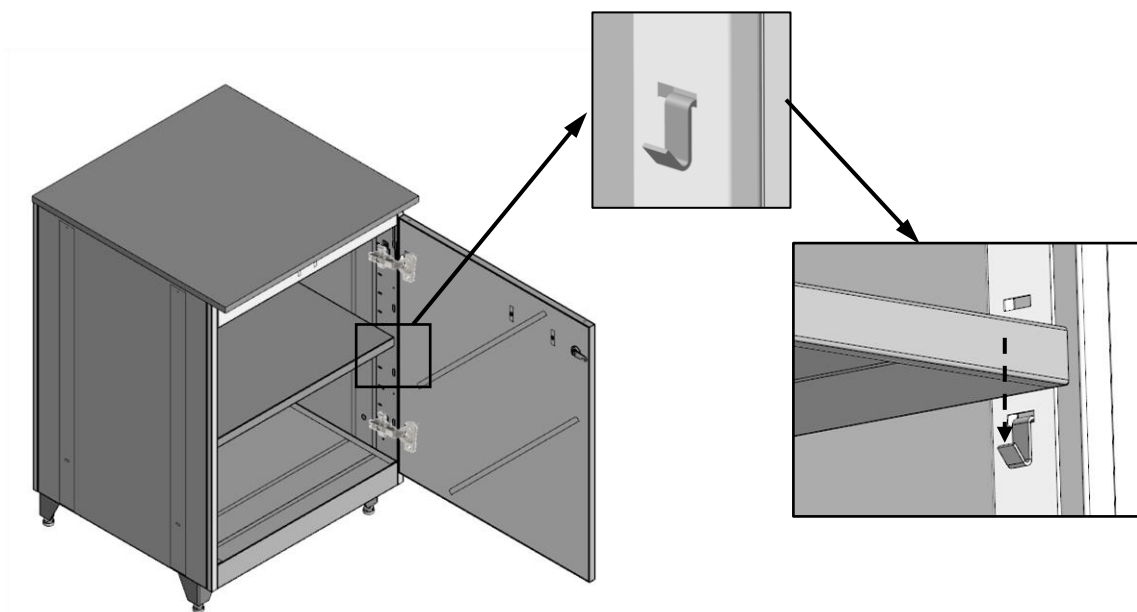


5.10. Установить комплект плинтусов на магнитах.

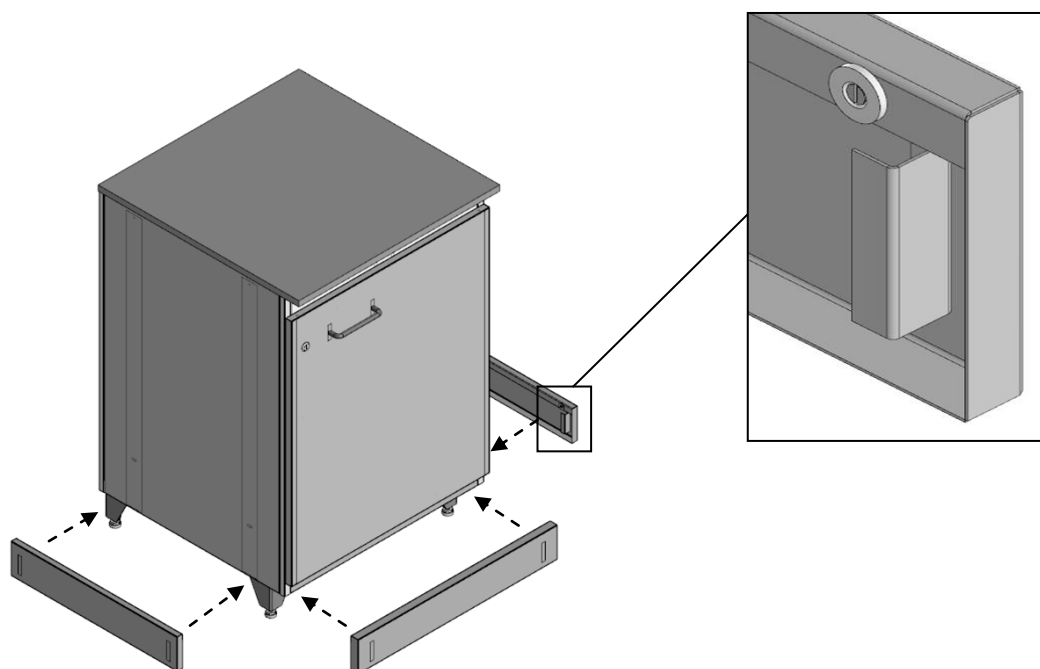


5.11. При комплектации электроблоком. Подготовить электроблок к монтажу. Установить комплект съемных кронштейнов на электроблок предварительно сняв лицевые панели с электроблока.

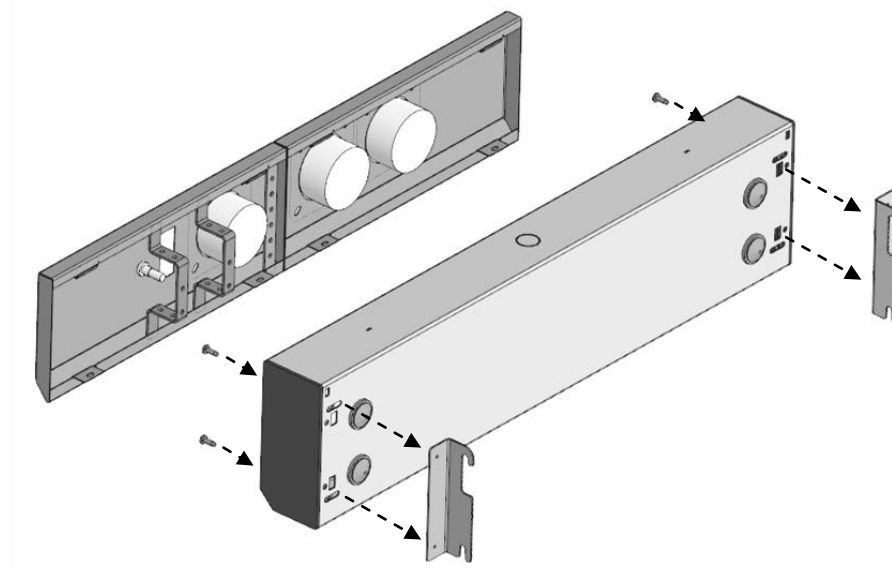

5.11.1 Закрепить стойки электроблока на каркасе стола с помощью винтов и шайб.

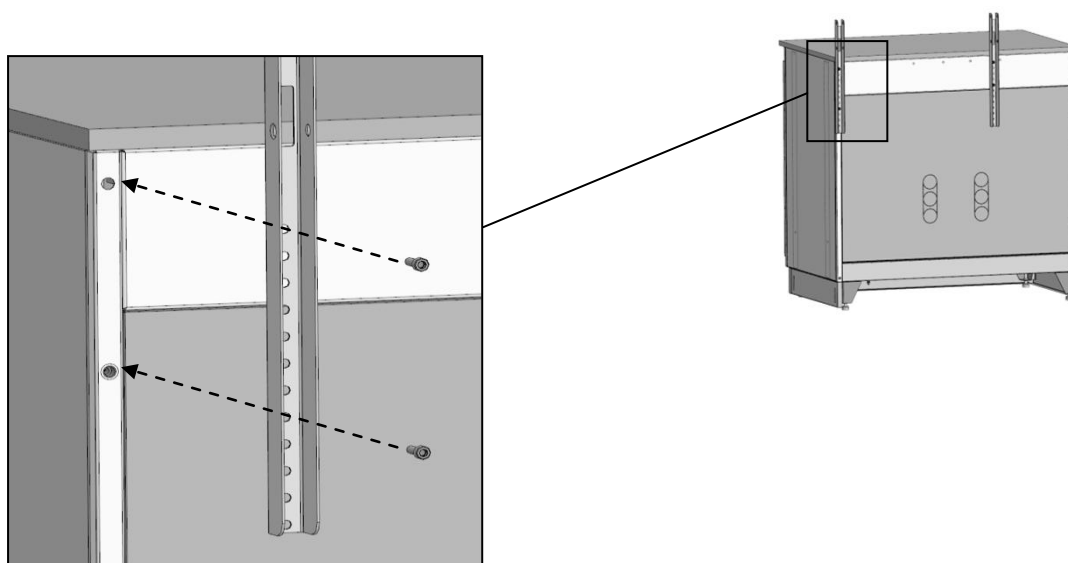

5.11.2 . Установить и зафиксировать электроблок на стойках с помощью винтов и шайб.

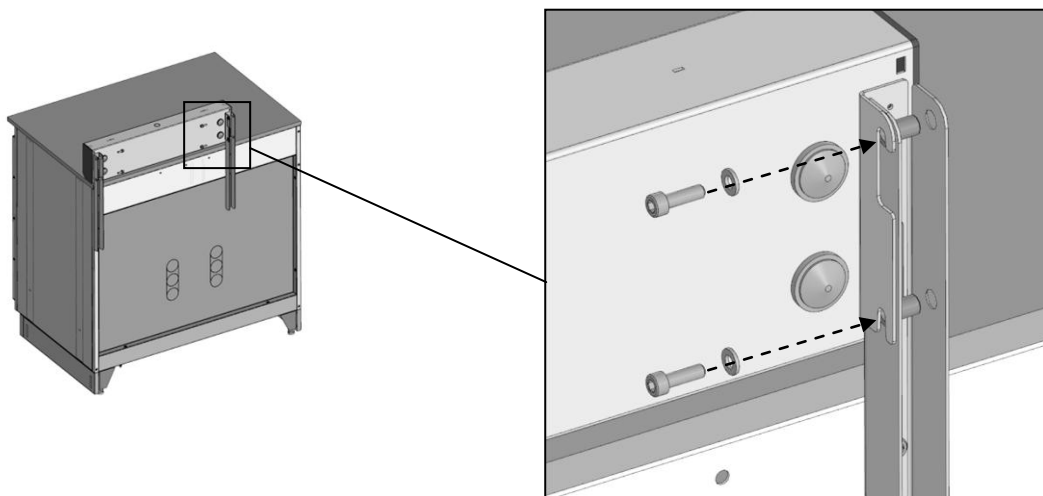

5.11.3. Установленный электроблок подключить к электроснабжению. **ВНИМАНИЕ!** Перед подачей напряжения необходимо убедиться, что металлический каркас стола надежно заземлен!



6. Инструкция по обслуживанию

6.1. Установить стол в необходимом месте помещения и с помощью регулируемых ножек откорректировать горизонтальность поверхности.

6.2. Проводить ежемесячный осмотр, в который входит:

- ✓ визуальный осмотр на наличие царапин;
- ✓ очистка рабочей плиты от пыли и различных загрязняющих веществ с использованием моющие не абразивные средства, предназначенные для ухода за мебелью;
- ✓ проверка затяжки резьбовых соединений;
- ✓ проверка надежности заземления металлического каркаса, при подключении стола к общему контуру заземления.

6.3. При обнаружении царапин произвести их подкраску.

7. Правила эксплуатации

7.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. Перед подачей напряжения необходимо убедиться, что металлический каркас стола надежно заземлен!

7.3. Перед подачей напряжения на изделие необходимо убедиться в отсутствии повреждений в подводящих проводах и электроустановочном оборудовании.

7.4. ВНИМАНИЕ! Не допускается подключать к розеткам изделия приборы с суммарной потребляемой мощностью более, указанной в таблице 1.

7.5. При комплектации выдвижными ящиками. Для устойчивости стола не рекомендуется открывать одновременно несколько ящиков или закрепить стол к стене.

7.6. При установке стола в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов защитить поверхность стенок от нагрева. Температура нагрева деталей тумбы не должна превышать +40° С.

7.7. При случайном разливе реактивов необходимо немедленно произвести их нейтрализацию и убрать продукты реакции с поверхности.

8. Свидетельство о приемке

СТОЛ - ТУМБА
(наименование изделия)

(заводской номер)

(обозначение)

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М.П.

(год, месяц, число)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. Консервация, транспортирование и хранение

9.1. Изделие транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта изделие допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения его от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

9.2. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

9.3. Изделие должен храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %

10. Гарантия изготовителя

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится гарантийный ремонт или замена изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации.

10.3. Срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации составляет 15 лет.

11. Сведения о рекламациях

11.1. При обнаружении дефектов или некомплектности поставки потребитель назначает комиссию и составляет Акт.

11.2. Акт об обнаруженных визуально дефектах должен быть составлен не позднее десяти дней после получения изделия, а о скрытых дефектах, выявленных в процессе эксплуатации - в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен производителю.

11.3. Все рекламации учитываются потребителем в табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации