

ООО Компания «ЭПАКТ»

644065, Россия, г.Омск, ул.Осипова, 85



серия

Аналитика EN

металлическая лабораторная мебель

**Стол весовой
СВ-Г900**

П А С П О Р Т

EAC

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Стол весовой (далее по тексту - «Стол») разработан и изготовлен с применением современных технологий и материалов и предназначен для установки весов аналитических и прецизионных и проведения работ (взвешивания) персоналом химико-аналитических, исследовательских, производственных и специализированных лабораторий с вредными и агрессивными веществами (нефть и нефтепродукты, растворители органические, кислоты органические и минеральные, кроме фтористоводородной кислоты, щелочи и др.).

1.2. Стол изготавливается в исполнении (УХЛ-4) для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре +15...+35°C и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги.

1.3. Производитель может вносить изменения, улучшающую конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.	Габаритные размеры, мм:	
	Длина-	900
	Ширина-	610
	Высота-	800
2.2.	Габаритные размеры плиты, мм:	
	Ширина-	450
	Длина-	500
	Высота-	100
2.3.	Масса, не более, кг-	

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1. Общий вид изделия показан на Рис.1.

3.2. Комплектность поставки приведена в Табл.1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1	Кожух весового стола	1	Металл, полимерное покрытие
2	Каркас	1	Металл, полимерное покрытие
3	Рабочая плита	1	Природный камень - гранит
4	Прокладка демпфирующая	4	Резина

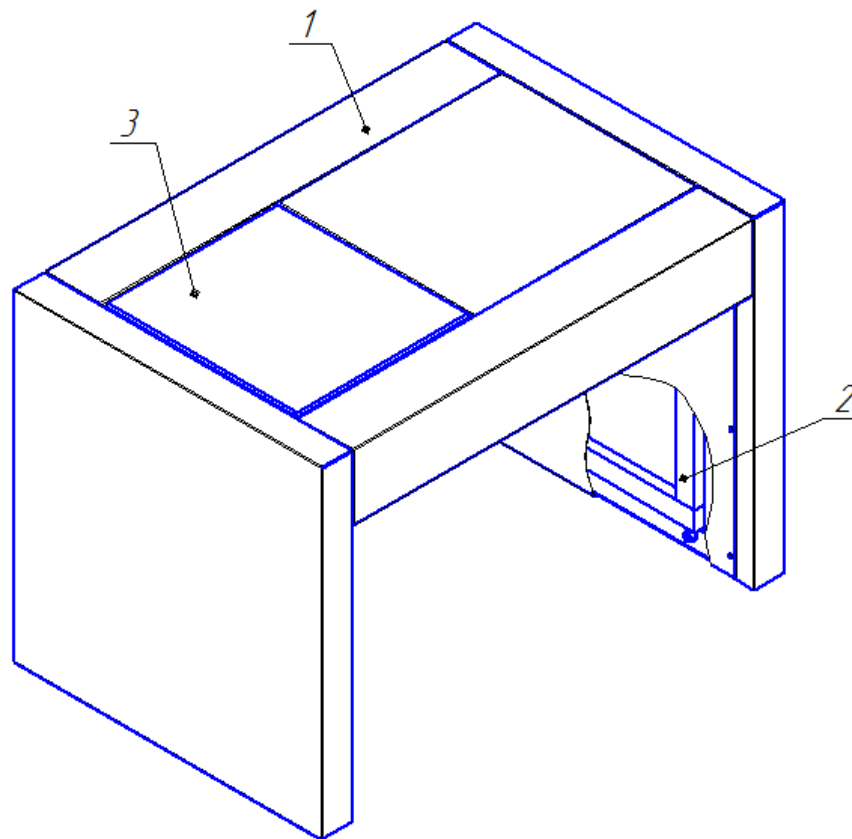


Рис.1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стол представляет собой сборную конструкцию из трубного жесткого каркаса (поз.2), кожуха (поз.1), и рабочей плиты (поз.3). По заказу стол может комплектоваться опциями: подставка под системный блок, стабилизатор, электроблок и т.д.

4.2.Кожух (поз.1) выполнен из гнутого металлического листа и защищен порошковым полимерным покрытием химически стойким к агрессивным средам.

4.3. Рабочая плита (поз.3) изготовлена из природного камня- гранита и установлена на прокладки демпфирующие регулируемых опор каркаса (поз.2) .

4.4. В зависимости от исполнения (заказа) возможна поставка стола с установленным на перемычке кожуха винтом заземления с гайками (на рисунке не показан).

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе со Столом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование, обученные правилам работы на данном оборудовании и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок».

5.3. Перед установкой электронных весов на Стол необходимо убедиться в том, что **металлический каркас стола надежно заземлен !**

5.4. При случайном разливе реактивов необходимо немедленно произвести их нейтрализацию и убрать продукты реакции с поверхности стола.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Стол обслуживают лица, обученные правилам работы и техники безопасности на оборудовании данного типа.

6.2. Изделие заказчику поставляется в собранном виде. Проверить комплектность Стола, согласно разделу 3, данного паспорта.

6.3. Установить Стол в необходимом месте помещения и с помощью регулируемых ножек последовательно выставить каркас и кожух в горизонтальное положение.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание устройства состоит в следующем:

7.1. Очистка стола от пыли, столешницы от химических веществ.

7.2. Проверка затяжки резьбовых соединений.

7.3. Проверка горизонтальности рабочей плиты.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол весовой СВ-Г900

(наименование изделия)

Проект ЭМЛ.01.06.0900/1200.0

(СВФЛ.015.00.00.000/

СВФЛ.3801.00.00.000)

(заводской номер)

(обозначение)

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М.П.

(год, месяц, число)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Внутренние и наружные поверхности Стола защищены порошковыми полимерным покрытием химически стойким к агрессивным средам.

9.2. Изделие может транспортироваться любым видом транспорта. Стол должен храниться в закрытом помещении в упакованных ящиках при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С и относительной влажности не более 80%.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена Стола при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации.

10.3. Срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации составляет 15 лет.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1. При обнаружении дефектов или некомплектности поставки потребитель назначает комиссию и составляет Акт.

11.2. Акт должен содержать следующие сведения;

- 1) наименование организации-потребителя изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес;
- 2) время и место составления акта;
- 3) занимаемые должности и фамилии лиц, составивших акт;
- 4) время получения изделия, его обозначение, заводской номер, дату изготовления;
- 5) время ввода изделия в эксплуатацию;
- 6) проработанное изделием число часов с момента его получения, характер выполнения работы;
- 7) наименование дефектных деталей;
- 8) подробное описание дефектов, по возможности, с указанием причин вызвавших эти дефекты и обстоятельства, при которых они обнаружены;
- 9) заключение комиссии, составившей Акт.

11.3. Акт об обнаруженных визуально дефектах должен быть составлен не позднее десяти дней после получения изделия, а о скрытых дефектах, выявленных в процессе эксплуатации - в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен производителю.

11.4. Все рекламации учитываются потребителем в Табл.2.

Таблица 2

№№ п/п	Дата рекламации	Краткое содержание Рекламации	Меры, принятые по рекламации