

FUMEX

PURE ADVANTAGE



ВЫТЯЖНОЙ РУКАВ **ME 50**

ГИБКАЯ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ
ВЫТЯЖКА **MiniTEX 1100 / 1500**

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ
ВЫТЯЖКА **MEX AA**

ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ
DSK 400 / 700

Аналитика
металлическая лабораторная мебель



Различные варианты креплений:

- потолочное
- настенное
- к сервисной стойке

Возможные варианты исполнения:

- кислотостойкое
- взрывозащищенное (искробезопасное)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оптимальная вентиляция рабочего пространства
- Большой типоразмерный ряд (различаются размерами, диаметром патрубка и количеством степеней свободы)
- Плавно маневрируются и стабильно фиксируются в любом выбранном положении
- Большой выбор насадок и креплений

Вытяжной рукав ME 50	4
Гибкая, телескопическая локальная вытяжка MiniTEX 1100 / 1500	12
Телескопическая локальная вытяжка MEX AA	16
Вытяжной шкаф DSK 400 / 700	18




Вытяжные рукава ME 50

Идеальная вытяжка для химических нефтегазовых лабораторий

Учитывая оптимальный дизайн, вытяжка Fumex ME диаметром 50 мм имеет очень низкий перепад давления, который обеспечивает ряд преимуществ:

- Низкий перепад давления экономит энергию.
- Шум потока воздуха уменьшается.
- Сниженный перепад давления не достигается путем выбора вытяжки более крупного диаметра.
- Сниженный перепад давления позволяет объединять работу ME с дополнительными вытяжными системами.
- Уникальная конструкция и надежные монтажные кронштейны.

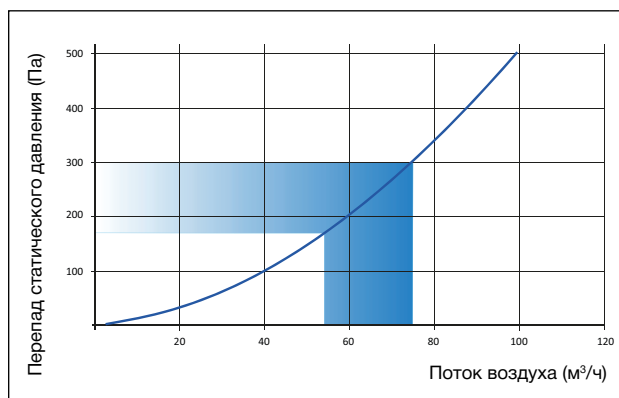

Низкий перепад давления

Наиболее низкий из возможных перепад давления является качественным аспектом, который всегда необходимо учитывать.

Обладая уникальным дизайном, конструкция Fumex ME объединяет в себе максимальную гибкость и низкий перепад давления. Воздух проходит через соединения, не создавая при этом излишней турбулентности и производя таким образом энергосберегающий низкий перепад давления, что обеспечивает менее шумные условия работы.

Рекомендуемый поток воздуха


Рекомендуемый поток воздуха для рукава 50 мм составляет 55–75 м³/ч (см. таблицу и график).

Деятельность	Поток воздуха	
Лаборатории	50–75 м³/ч	15–21 л/с
Учебные заведения		

Перепад статического давления измеряется в соответствии со стандартом ISO 5167-1.

Оптимальный захват


Для получения оптимального результата от работы местной вытяжки важно использовать её гибкость, чтобы максимально приблизиться к загрязнителю. Правильным расстоянием было бы расстояние в 2–3 раза больше диаметра трубки экстрактора. При рекомендуемом потоке воздуха вытяжка обеспечит высокую эффективность, даже если в окружающей среде есть помехи.

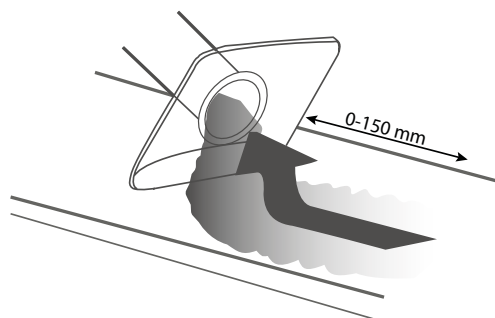

Уникальные качества

Соединения Fumex ME имеют запатентованную конструкцию фрикционной муфты, которая в сочетании с большим диаметром соединения и одиночным рукавом обеспечивает безопасный, позиционно-стабильный рычаг с плавной регулировкой. Всё это исключает необходимость прикладывать чрезмерное усилие или использовать инструменты на регулировочной ручке.

Шарниры с усиленными концами и шарикоподшипниками смягчают трение и позволяют двигать рукав вверх и вниз, сохраняя при этом стабильность и функциональность.

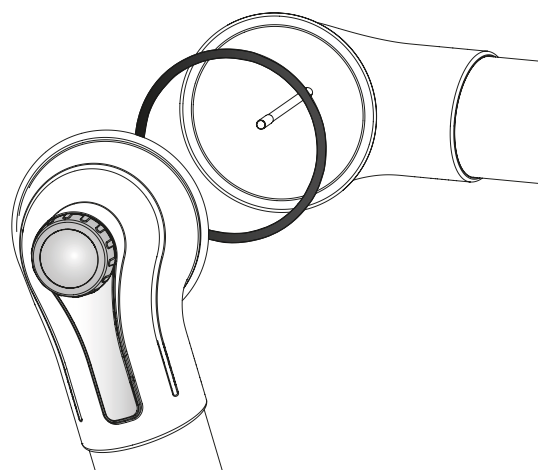

Один рукав – много опций

Fumex ME имеет полный перечень аксессуаров, соответствующих каждой ситуации, что позволяет создавать оптимальную вытяжку для сбора опасных воздушных газов и твердых частиц.



СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ ME

Подходит для вытяжки большинства загрязняющих веществ в воздухе, например, в лабораториях, школах, больницах, фармацевтической промышленности, маникюрных салонах, в легкой промышленности.




ВЕРСИЯ ME ESD

Подходит для вытяжки загрязняющих веществ в среде, где необходимо избегать риска искрообразования, а также в областях, где продукция должна быть сертифицирована по стандарту ESD (например, электронная промышленность).

МЕТ для монтажа к стене и потолку,
3 соединения


Стандарт	Размер, мм			Вес, кг
	A	B	Ø C	
MET 1000-50	400	300	50	1,50
MET 1300-50	550	450	50	1,65
MET 1500-50	750	450	50	1,70
Вытяжные рукава в исполнении ESD				
MET 1000-50ES	400	300	50	1,50
MET 1300-50ES	550	450	50	1,65
MET 1500-50ES	750	450	50	1,70

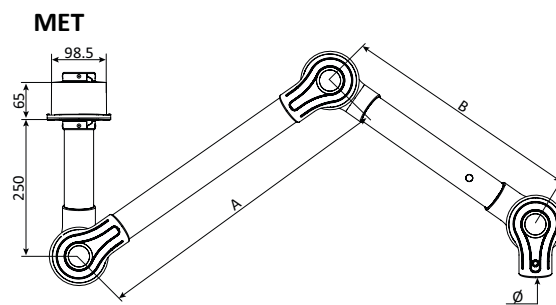

МЕТ для монтажа к стене или потолку,
за исключением кронштейна МТІ или МVК


МЕВ для монтажа к столу, 3 соединения

Стандарт	Размер, мм			Вес, кг
	A	B	Ø C	
MEB 1000-50	400	300	50	1,50
MEB 1300-50	550	450	50	1,65
MEB 1500-50	750	450	50	1,70
Вытяжные рукава в исполнении ESD				
MEB 1000-50ES	400	300	50	1,50
MEB 1300-50ES	550	450	50	1,65
MEB 1500-50ES	750	450	50	1,70

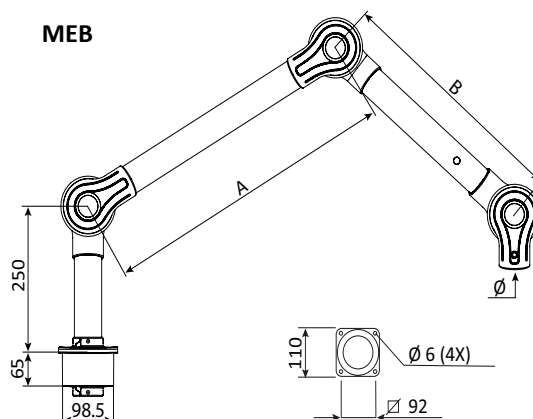

МЕТ для монтажа к стене и потолку,
2 соединения


Стандарт	Размер, мм		Вес, кг
	A	Ø C	
MET 650-50	300	50	1,50
MET 750-50	450	50	1,65
Вытяжные рукава в исполнении ESD			
MET 650-50ES	300	50	1,00
MET 750-50ES	450	50	1,10

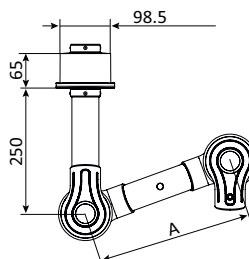

МЕТ для монтажа к стене или потолку,
за исключением кронштейна МТІ или МVК


МЕВ для монтажа к столу, 2 соединения

Стандарт	Размер, мм		Вес, кг
	A	Ø C	
MEB 650-50	300	50	1,00
MEB 750-50	450	50	1,10
Вытяжные рукава в исполнении ESD			
MEB 650-50ES	300	50	1,00
MEB 750-50ES	450	50	1,10

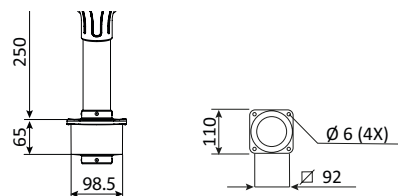

МЕВС для монтажа к столу, 1 соединение

Вытяжные рукава в исполнении ESD	Размер, мм	Вес, кг
	Ø C	
MEBC 700-50ES	50	0,8

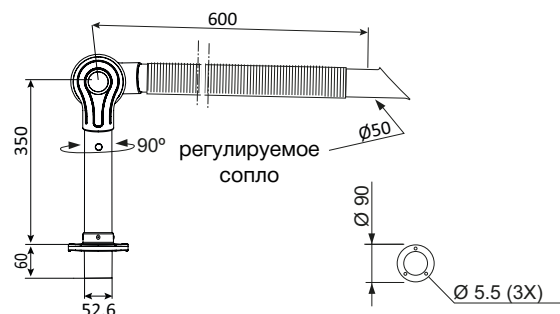

Рекомендуемая высота установки

Для обеспечения оптимальной вытяжки рекомендуется использовать следующие высоты установки и боковое смещение относительно рабочей зоны:


Рекомендуемая высота установки

Наименование	Высота, мм
MET 1000-50	1700-2000
MET 1300-50	1900-2200
MET 1500-50	2000-2300

Рекомендуемое боковое смещение


Радиус по отношению к рабочей зоне

Наименование	S, мм
MET 1000-50	300-600
MET 1300-50	400-700
MET 1500-50	500-800

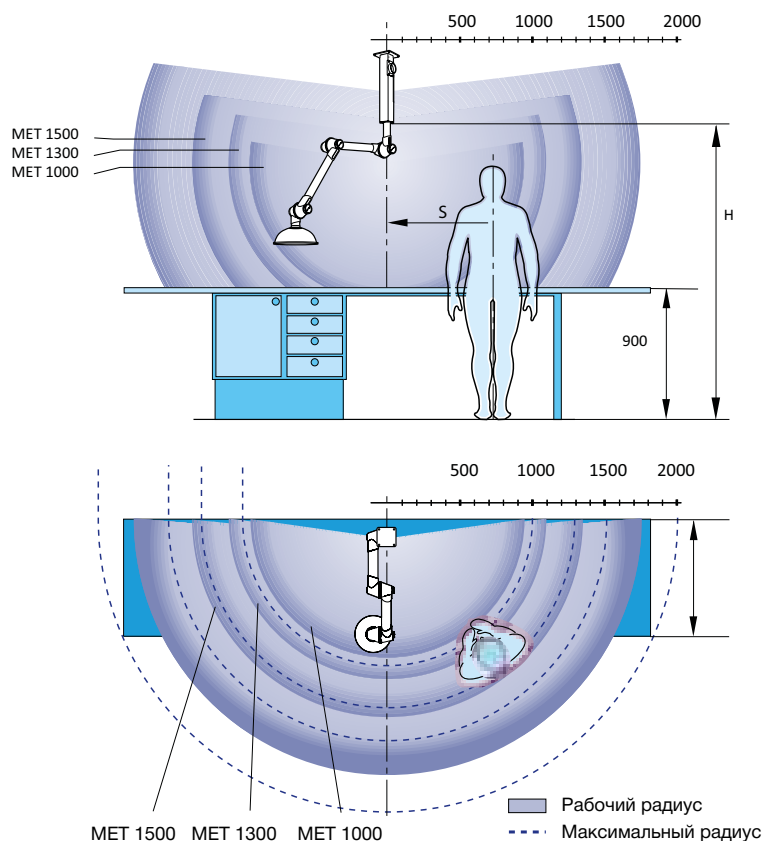


Перепад давления

Перепад статического давления измеряется в соответствии со стандартом ISO 5167-1. Уровень шума измеряется в соответствии со стандартом ISO 3743. Указанный уровень звука относится к уровню звукового давления.

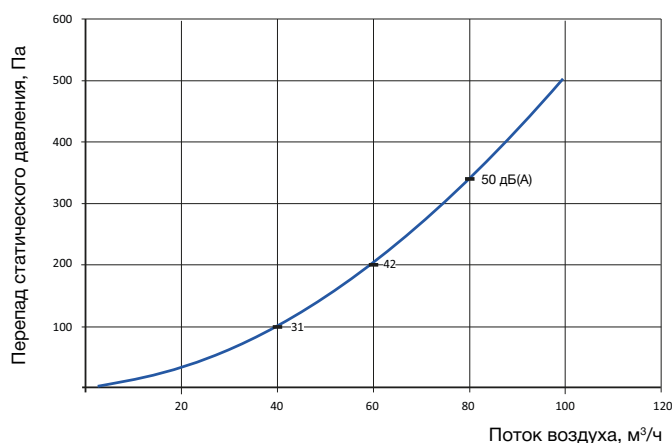



Колпаки Температурный диапазон: от -15 до +80 °C

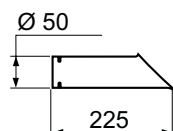


ВСАСЫВАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ

Всасывающее отверстие используется в ограниченном пространстве, а также для приближения к работе без её прерывания.

Стандарт	Вариант	Вес, г
MES 300-50	ES	115

Материал

Стандарт:	Алюминий
ES:	PEEL black

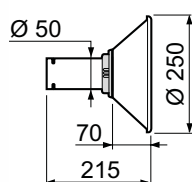


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАК

Металлический колпак используется при работе в коррозионной среде, а также для вытяжки горячих газов и пыли. Металлический колпаки могут быть оснащены рабочим освещением.

Стандарт	Вариант	Вес, г
MEM 250-50	ES	300

Материал

Стандарт:	Алюминий с порошковым покрытием
ES:	Алюминий

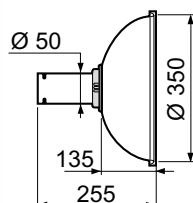

КОЛПАК-КУПОЛ

Прозрачный колпак-купол подходит для вытяжки легких газов с более широким рассеиванием загрязняющих веществ без блокирования обзора пользователя.


Стандарт	Вариант	Вес, г
MEK 350-50	ES	415

Материал

Стандарт:	ПММА
ES:	PEEL black



Колпаки Температурный диапазон: от -15 до +80 °C

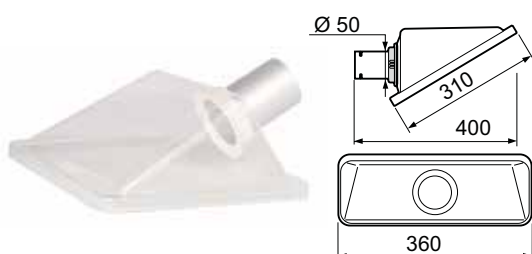


КВАДРАТНЫЙ КОЛПАК

Квадратный колпак подходит для размещения над газами с высоким подъемом либо прилегающих к рабочей поверхности загрязняющих веществ без подъема или с низким подъемом – всё это без вмешательства в работу.

Стандарт	Вариант	Вес, г
MESH 350-50	-	450

Материал

Стандарт: ПЭТГ

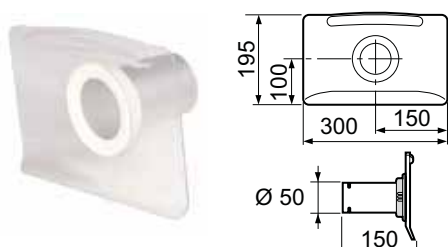

КОЛПАК С ПЛОСКИМ ЭКРАНОМ


Колпак с плоским экраном разработан для максимизации рабочей зоны, при этом он не закрывает объект от пользователя. Колпак с плоским экраном обеспечивает наилучший эффект всасывания при выполнении настольных и стендовых задач.

Стандарт	Вариант	Вес, г
MEPH 300-50	ES	330

Материал

Стандарт: ПЭТГ

ES: PEEL black

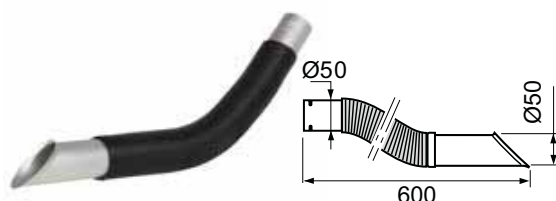

ГИБКОЕ ВСАСЫВАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ

Гибкое всасывающее отверстие предназначено для максимально легкого управления без потери эффективности воздушных потоков. Доступно только в версии ESD.

Стандарт	Вариант	Вес, г
MEFS 600-50ES	-	315

Крепежи



В стандартный комплект всех лабораторных вытяжек Fumex входит полное шарнирное соединение, которое позволяет вращаться на 360° без необходимости добавления специальной соединительной муфты. Как настенные, так и потолочные крепежи имеют специальный квадратный профиль из анодированного алюминия для особо надежной установки. Данный алюминиевый профиль обеспечивает возможность изменения настенных и потолочных крепежей в соответствии с индивидуальными потребностями на рабочем месте.

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЕЖИ МТИ И МТФ


Потолочный крепеж функционирует как простой и стабильный воздуховод, исключает необходимость в дорогостоящих воздуховодах и дополнительных отверстиях в фальш-потолках. По запросу длина МТИ может составлять более 2 м.

Потолочный крепеж для установки в сквозных балках. Крепежная пластина регулируется по всей длине алюминиевого профиля. При необходимости алюминиевый профиль можно обрезать в процессе установки.

Наряду со стандартными версиями, МТИ и МТФ также доступны в версиях ESD (ES). Поставка потолочных крепежей может осуществляться с эпоксидным покрытием снаружи во всех длинах до 3 м (L). Для агрессивной среды мы рекомендуем эпоксидное покрытие снаружи и внутри до 1,25 м (IL).

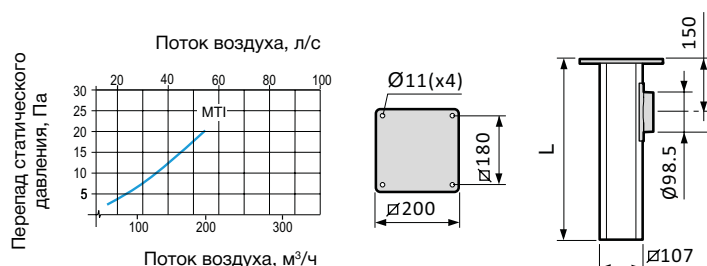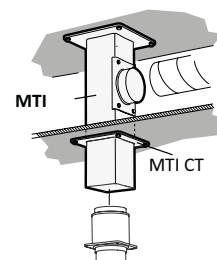

Стандарт	Размер, мм	Вес, г
MTI 250	250	3,15
MTI 500	500	3,80
MTI 750	750	4,50
MTI 1000	1000	5,15
MTI 1250	1250	5,80
MTI 1500	1500	6,45
MTI 1750	1750	7,10
MTI 2000	2000	7,75

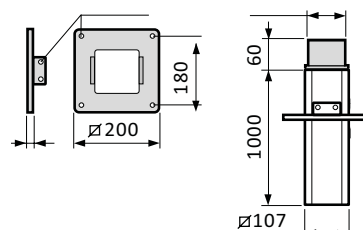


Стандарт	Размер, мм	Вес, г
MTF	1000	4,20

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ МТИ СТ

Заводская табличка, используется с потолочным крепежом МТИ для стабилизации, а также для воздуховодов в фальш-потолках. Наряду со стандартной версией, заводская табличка также доступна в версии ESD (ES).



Стандарт	Вес, г
MTI СТ	0,050

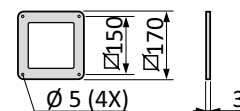

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ МВК

Входит в стандартную комплектацию для настенного кронштейна. Настенные крепежи могут быть заказаны в соответствии с требованиями, в горизонтальных и вертикальных длинах. Наряду со стандартной версией, крепеж также доступен в версии ESD (ES).

Стандарт	Вес, г
MVK	2,15

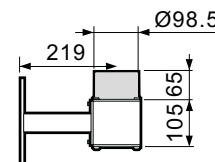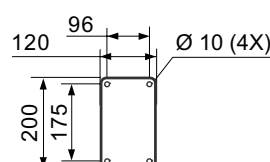



Крепежи

ГИБКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ MBF

Гибкий крепеж для установки на поверхность стола или полка. Поставляется в комплекте с двумя зажимами.

Наряду со стандартной версией, настольный крепеж доступен в версии ESD (ES).


Стандарт	Вес (г)
MBF	0,75
MBFC ES	0,70

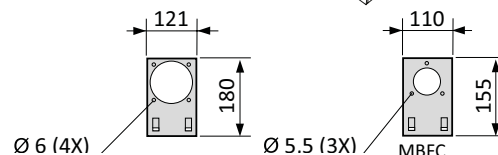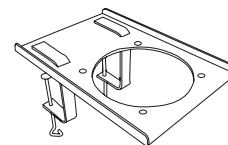

ПЕРЕХОДНАЯ ВТУЛКА MRM

Полипропилен, подходит к стандартному крепежу 98,5 мм, для уменьшения до Ø 50 мм.

Стандарт	Вес (г)
MRM 100-50	0,08

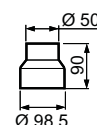

Описание

Стандартная версия ME

Стандартная версия ME включает в себя соединения из полипропилена и трубы из анодированного алюминия. Подходит для вытяжки большинства видов загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, например, в лабораториях, школах, больницах, фармацевтической промышленности, парикмахерских, а также в индустрии легкой промышленности.

Шарикоподшипник

оснащенные регулируемые фрикционные соединения из полипропилена (PP) с направляющим кольцом из резины, имеющим низкий коэффициент трения. Опорные пружины и другие составные части из оцинкованной или нержавеющей стали.

Версия ME ESD



Соединения выполнены из проводящего полипропилена, что делает весь рукав электроприводными, отводя любое статическое электричество к отдельному соединению заземления. Версия ME ESD подходит для вытяжки загрязняющих веществ, находящихся в воздухе в среде, где существует необходимость избегать рисков искрообразования, вызванного статическим электричеством, а также в областях, где продукция должна быть сертифицирована по стандарту ESD (например, электронная промышленность). ME ESD одобрен в соответствии с EN 61340-5-1.

Трубы

изготовлены из тонкостенного анодированного алюминия. Стандартная комплектация включает в себя герметичный демпфер.

Доставка

Потолочный MET

поставляется в сборе, за исключением насадки или всасывающего отверстия.

Потолочные /
настенные
крепления
MTI, MTF/ MVK

необходимо заказывать отдельно.

Настольный MEB

поставляется в сборе с крепежной планкой для установки на стол, за исключением насадки и всасывающего отверстия. Гибкое настольное крепление MBF необходимо заказывать отдельно.

Локальная вытяжка

MiniTEX 1100, 1500

Гибкая, телескопическая локальная вытяжка с низким перепадом давления

Телескопическая локальная вытяжка FUMEX MiniTEX, 1100 и 1500 мм, применяется для лабораторий, в которых необходима вытяжка с наименьшим перепадом давления.

Вытяжка MiniTEX оборудована пневматическими пружинами, что обеспечивает баланс веса вытяжного рукава. Регулируемая телескопическая функция, подвижный угловой шарнир и шарнирное соединение на 360°, наряду с гибким всасывающим устройством, обеспечивает локальной вытяжке одновременно легкий ход и надежную фиксацию.

FUMEX всегда разрабатывает локальные вытяжки с внешними опорными рычагами, которые обеспечивают естественный и линейный воздушный поток. Это гарантирует низкий перепад давления и низкий риск блокировки.

Регулировка шарниров и телескопической функции может выполняться снаружи. Трубы с гладкими стенками позволяют с легкостью выполнять внутреннюю очистку вытяжного канала. Герметичная заслонка поставляется вместе с вытяжным рукавом. MiniTEX доступен в конструкциях для потолочного и настенного крепления.

Благодаря специальной телескопической функции, MiniTEX имеет гораздо более низкий перепад давления, чем обычные всасывающие рукава. Таким образом, вытяжка исключительно подходит там, где есть необходимость в низком перепаде давления в вытяжной системе. MiniTEX также может быть оборудован различными колпаками, которые увеличивают эффективность всасывания.

Также в линейку Fumex входят вентиляторы, аксессуары, автоматические регуляторы и фильтры, подходящие для локальной вытяжки.

Идеально для низких потолков


MiniTEX идеально подходит для низких потолков и низко расположенной осветительной системы. Телескопическая функция с одним сгибаемым соединением означает, что вытяжка никогда не будет подвергаться риску столкновения с низко висящими светильниками или низкими подвесными потолками.



Низкий перепад давления



Перепад статического давления, Па

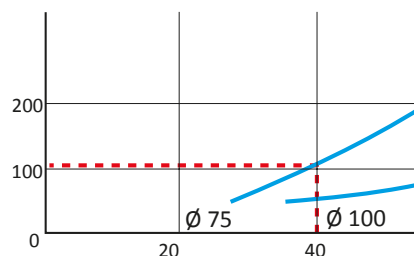

Поток воздуха, м³/ч

Низкий перепад давления дает много преимуществ. MiniTEX имеет линейный воздушный поток, без внутренних компонентов, препятствующих воздушному потоку. В то же время телескопическая функция позволяет обеспечивать относительно высокую скорость воздуха во входном патрубке.

Для большинства типов лабораторий рекомендуемым параметром является диаметр 75 мм и воздушный поток 40 л/с (150 м³/ч). Этот воздушный поток обеспечивает достаточно большой объем воздуха для эвакуации загрязняющих веществ, которые в нём возникают. MiniTEX диаметром 75 мм обеспечивает перепад статического давления лишь на 110 Па при 40 л/с (150 м³/ч), в то же время скорость

воздуха сопла составляет около 10 м/с. Указанные характеристики обеспечивают некоторые преимущества:

- Легко использовать MiniTEX в одной вентиляционной системе, например, наряду с вытяжным шкафом с очень низким перепадом давления.
- Высокая скорость воздуха обеспечивает эффективное всасывание загрязняющих частиц, также на него нелегко воздействовать другими воздушными потоками.
- Низкий перепад давления минимизирует риск возникновения проблем с шумом.

Аккуратные и надежные крепежи

MiniTEX поставляется с надежными крепежами, выполненными из анодированного алюминия с высоким качеством обработки, для обеспечения эффективной вытяжки.



MTI-125

Потолочный крепеж может быть оснащен соединительными муфтами как под, так и над подвесным потолком, в последнем случае предпочтительно вместе с MTI CT-125.



MVK-125


Настенный крепеж всегда входит в комплект поставки моделей с обозначением MXV.




MTF-125

Потолочные крепежи для установки через, например, потолочную балку. Крепежная пластина регулируется по всей длине алюминиевой трубки, при необходимости алюминиевый профиль можно разрезать по размеру.

ДИАПАЗОН И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ
для MX 1100-75 и MX 1100-100

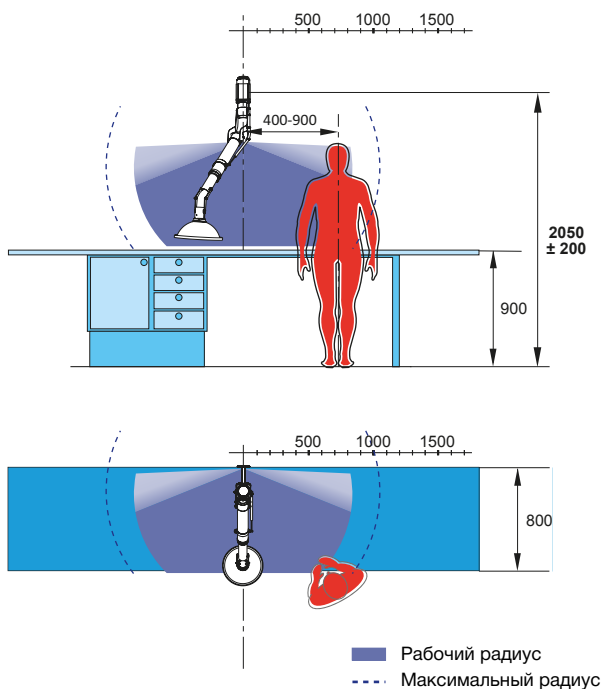

ДИАПАЗОН И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ
для MX 1500-75 и MX 1500-100

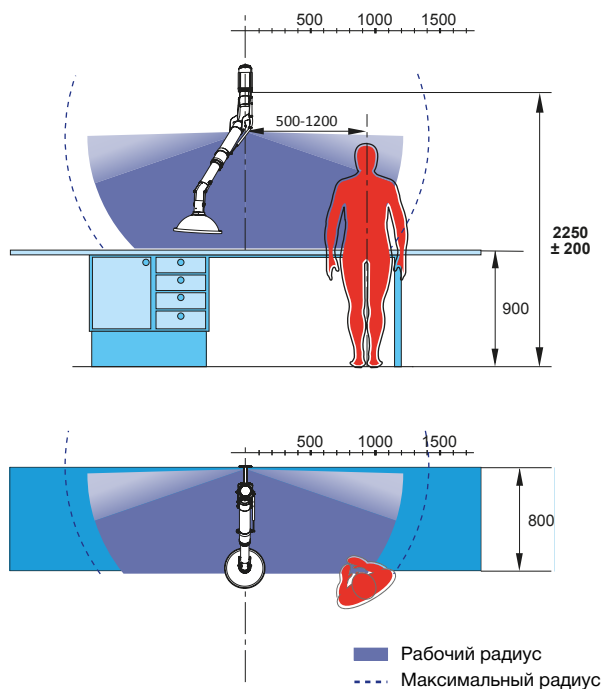


Для того чтобы оптимизировать использование вытяжки, рекомендуется следовать вышеуказанным параметрам высоты установки, а также бокового расстояния от рабочей зоны.

Области применения


Размер, мм	Деятельность
Ø 75	Лаборатории, школы, научные аудитории
Ø 100	Лаборатории, лёгкая промышленность: • клей, • растворители, • пайка твердым припоем, • сварка тонколистового металла / аргонодуговая сварка

Схема перепада давления

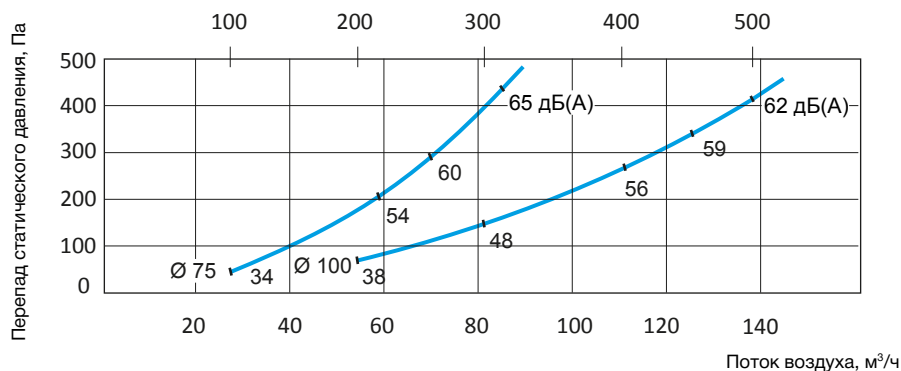

Крепление


КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

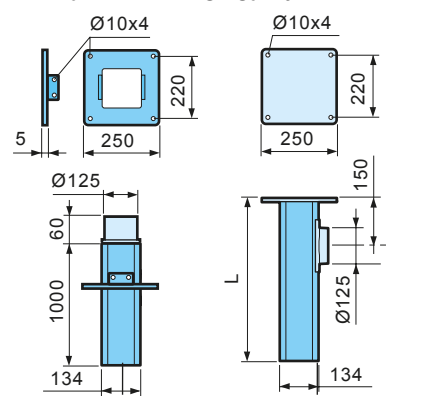


MTF-125

MTI-125

Крепление к потолку	Длина, мм	Вес, кг
MTI 500-125	500	4,90
MTI 750-125	750	5,80
MTI 1000-125	1000	6,75
MTI 1250-125	1250	7,65
MTI 1500-125	1500	8,60
MTI 1750-125	1750	9,50
MTI 2000-125	2000	10,40
MTF 1000-125	1000	6,50

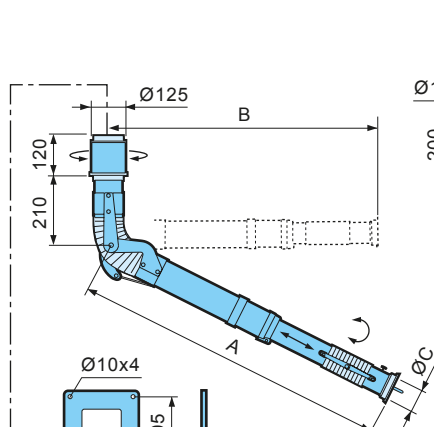


MTI CT-125

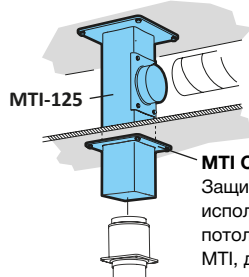

MTI CT-125
Защитная панель, используется наряду с потолочным крепежом, MTI, для стабилизации, а также для прикрытия отверстия в подвесном потолке.

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

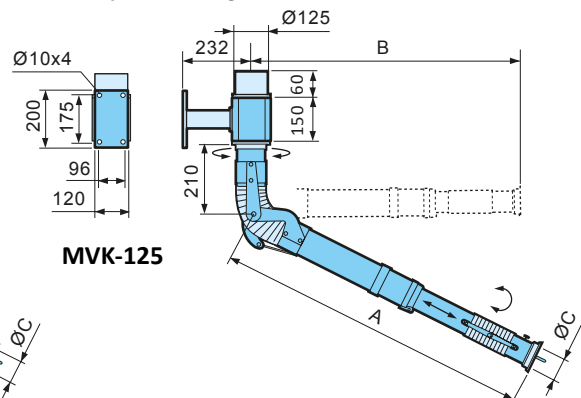


MVK-125

Наименование	A, мм	B, мм	Ø C, мм	Вес, кг
MXT 1100-75	1100	800	75	4,6*
MXT 1500-75	1500	1000	75	5,3*
MXT 1100-100	1100	800	100	5,8*
MXT 1500-100	1500	1000	100	6,6*


*Вес указан без учета крепежа

Крепление к стене	Вес, кг
MVK-125	2,5

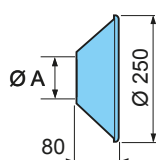


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАК

Наименование	Ø A, мм	Вес, г
ММ 250	75	140
ММ 251	100	140

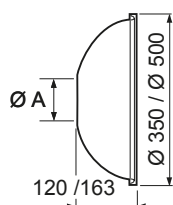

КОЛПАК-КУПОЛ

Наименование	Ø A, мм	Вес, г
МК 350	75	275
МК 351	100	275
МК 500	100	400

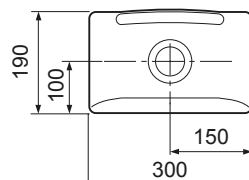

КОЛПАК С ПЛОСКИМ ЭКРАНОМ

Наименование	Ø A, мм	Вес, г
МРН 300	75	170
МРН 375	100	290

Воздуховоды и профили

Изготовлены из тонкостенного анодированного алюминия.

Металлические / пластиковые компоненты

Изготовлены из листовой стали с порошковым покрытием / полипропилена.

Колпаки

Колпаки МК и МРН изготавливаются из прозрачного ПЭТГ. Колпаки ММ изготавливаются из алюминия.

Шланг

Пружинная стальная катушка полностью заключена в выделку из полиамида с ПВХ-покрытием. Огнеупорная, подходит для работы с многими химическими веществами. Температурный диапазон: от -30 до +100 °C.

Комплектация

Рукав поставляется в комплекте с герметичной заслонкой. Потолочные и настенные крепежи необходимо заказать отдельно. Металлические, купольные и плоские колпаки доступны в качестве аксессуаров.

Телескопическая локальная вытяжка MEX AA

для вытяжки паров от атомно-абсорбционных процессов

MEX AA доступна в двух вариантах исполнения: круглом 250 мм (AAR) или прямоугольном 500 x 250 мм (AAF). Вытяжка в исполнении AAF предназначена для работы с загрязненным воздухом при высокой температуре, например, из атомно-абсорбционной установки.


Вытяжной рукав и все компоненты, которые подвергаются риску контакта с горячим воздухом, выполнены из нержавеющей стали EN 1.4404 (316 L). Настенные крепления выполнены из мягкой листовой стали с порошковым покрытием. Вертикальное телескопическое движение составляет 440 мм.

Описание Вытяжка изготовлена в стандартном исполнении для настенного крепления. Регулировка настенного крепления осуществляется в горизонтальном направлении. Потолочное крепление может быть заказано дополнительно.

Подключение Для подсоединения к вентиляционному воздуховоду осуществляется поставка 1,5 м гибкого шланга с максимальной термостойкостью 250 °C, наряду с вытяжкой.

Телескопическое движение Создается при помощи двух передвижных колец, выполненных из тефлона для термостойкости, а также при помощи фиксирующего устройства, чтобы убедиться, что рукав находится в вертикальном положении.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА			
Модель	Исполнение	Материал	Габаритные размеры, мм
MEX	AAR (круг)	Нерж. сталь	250
	AAF (прямоугольник)		500 x 250

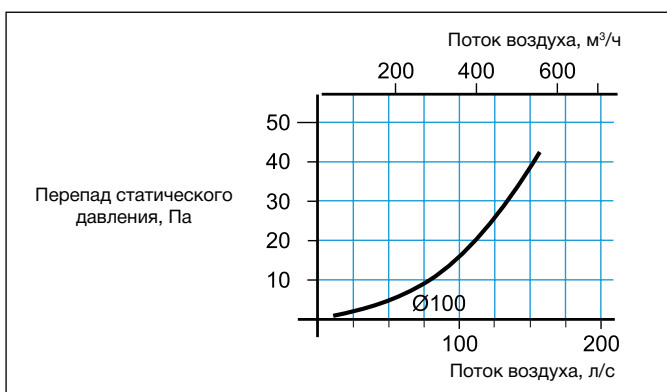

Во избежание повреждений и прочих неудобств с материалом далее по воздушному потоку рекомендуется извлекать пропорционально большой объем окружающего воздуха помещения с целью снижения температуры извлекаемого воздуха.

Пример:

Воздух из атомно-абсорбционной установки	10 л/с	при 1000 °C
Воздух помещения	70 л/с	при 20 °C
Смешанный воздух (отработанный воздух)	80 л/с	при ~100 °C

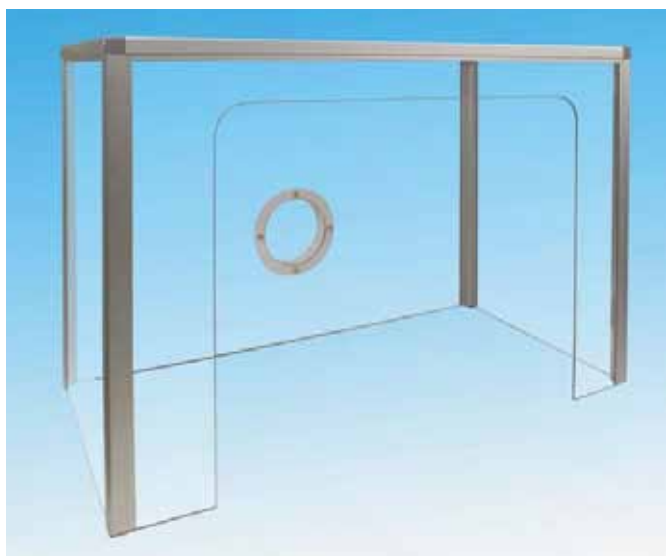

ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ

DSK

400 / 700

**для среды, в которой
необходима максимальная
эффективность вытяжки**

Вытяжной шкаф DSK предназначен для работы с открытой химической посудой, установкой химической аппаратуры, приклеиванием и т. д., где присутствует несколько источников загрязнения.

Вытяжные шкафы FUMEX изготовлены из прозрачных листов и устойчивой алюминиевой рамы, таким образом шкаф не блокирует рабочую зону. Также при необходимости, обусловленной различными задачами и локациями, шкаф легко подвергается транспортировке.

DSK-400 и DSK-700 выполнены в двух стандартных размерах. Изготовление шкафов в специальных размерах, а также иной конструкции выполняется по запросу.

Материал

4 мм Vivak листы ПЭТГ. Анодированная алюминиевая рама.

Вытяжка

Подсоединена к отдельному вентилятору или к мобильному типу фильтра LF 70.

Стандартная конфигурация


Поставка вытяжного шкафа осуществляется в частично собранном виде. Подсоединение вытяжного воздуха выполнено сзади. При заказе необходимо указать, требуется ли вам альтернативное расположение.

DSK-400	
Поток воздуха	При скорости фронта 0,5 м/с – 67 л/с (240 м³/ч)
	При скорости фронта 0,3 м/с – 40 л/с (145 м³/ч)
Соединительный размер	Ø 125 мм
Объем	96 л
Вес	6,5 кг


DSK-700	
Поток воздуха	При скорости фронта 0,5 м/с – 208 л/с (750 м³/ч)
	При скорости фронта 0,3 м/с – 125 л/с (450 м³/ч)
Соединительный размер	Ø 160 мм
Объем	350 л
Вес	13,5 кг

Крепление

DSK-400

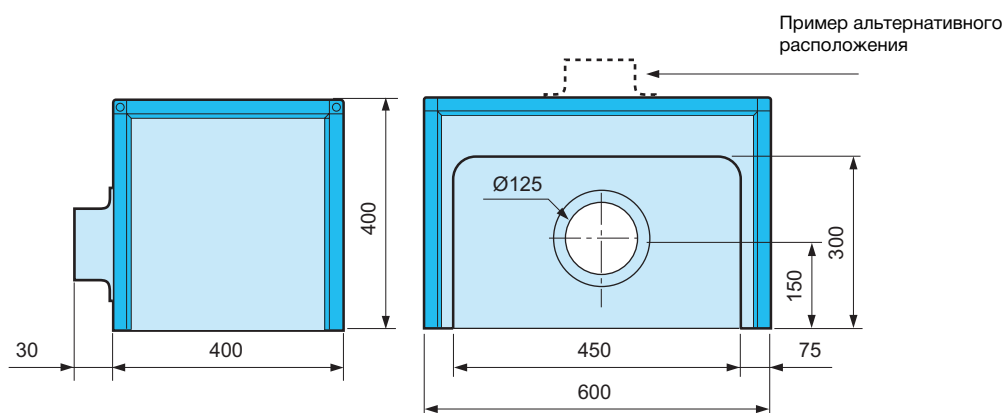

DSK-700

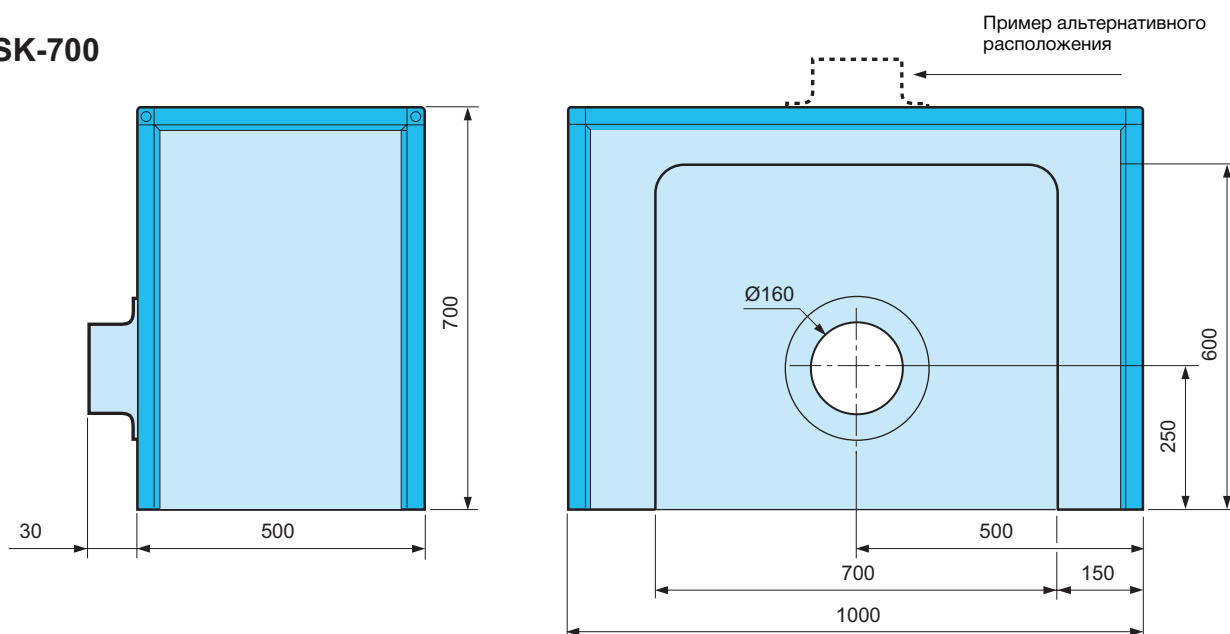



Металлическая лабораторная мебель «Аналитика»

ШКАФЫ
ВЫТЯЖНЫЕ

ШКАФЫ И ТУМБЫ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ

МОЙКИ
С СУШКОЙ

СТОЛЫ, ТУМБЫ,
СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ
МАСТЕРСКИХ

Аналитика
металлическая лабораторная мебель

ООО «Лабораторная мебель «Аналитика»



тел.: +7 (3812) 433-962



info@analytica-lab.ru



www.analytica-lab.ru